

Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für die  
**VaWiKo® EPI-PLATTE**  
wecken konnten, melden Sie sich bei uns

## VaWiKo® EPI-PLATTE

Lochabstand 12 | 16  
mit | ohne Krallen



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Deutschland  
bestellung@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-550

oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.

[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)



Copyright © Königsee Implantate GmbH/StZi | Edition 03 | 2021-04

Alle Vorteile auf einem Blick

- **Sollbiegestelle** in der Mitte des Implantates für kontrollierte Anmodellierung am Knochen
- **Verschiebungsfreie Platzierung** nach Positionsfestlegung auf dem Periost durch zwei endständige kleine Krallen
- **Periostschonend** durch die Konturierung der Unterflächfläche als „Low-Contact-Plate“
- **Schlankes Plattendesign** mit versenkten Schraubenköpfen trägt zur Schonung der Weichteile bei

### Zielgruppe

Die Versorgung mit einer VaWiKo® EPI-Platte erfolgt bei Patienten, deren Wachstumsfugen noch nicht geschlossen sind.

Das Restwachstumspotenzial muss klinisch und röntgenologisch abgeschätzt werden.



## Indikationen

### An der Tibia

- Wachstumslenkung im Bereich der Frontalebene an den Epiphysenfugen der Tibia
- Wachstumslenkung im Bereich der Sagittalebene an den Epiphysenfugen der Tibia (bei einem rekurvierenden Wachstum der Tibiaepiphyse) ist durch die dorsal verlagerte Implantation von Platten auf der Innen- und Außenseite eine Wachstumsbeeinflussung der Neigung der Tibiagelenkfläche möglich
- Wachstumsbeeinflussung in der Frontalebene am oberen Sprunggelenk medial, evtl. lateral sowie ventral bei Einschränkung der Dorsalextension am oberen Sprunggelenk im Bereich der distalen Tibiaepiphyse

### Am Femur

- Wachstumslenkung im Bereich der distalen Femur-Epiphyse
- Beeinflussung von Kniebeugekontrakturen mit geringem und mittelgradigem Ausmaß bis zu einem Winkel von maximal 25°

### Seltene Indikationen

- Blockierung der Trochanter Major-Apophyse, Blockierungen der distalen Radiusepiphyse, bei Ulnar-Drift des Handgelenkes, Blockierungen im Bereich des distalen Humerus bei Cubitus Varus oder Valgus.



## Eigenschaften


- Reintitan, **TiOB®-beschichtet\***
- mit bzw. ohne Kralle
- Plattenlängen 24 bzw. 28 mm
- Plattenbreite 10 mm
- Plattenstärke 1.8 mm
- Lochanzahl 2
- Lochabstand 12 bzw. 16 mm
- Soll-Biegestelle
- Schrauben Ø 4.0 mm

### Information

Der Systemname VaWiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Variabel winkelstabile Kombination“ ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung in variablen Winkeln kombiniert. VaWiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

TiOB® beschreibt eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.

## VaWiKo® EPI-Platte 4.0 vws

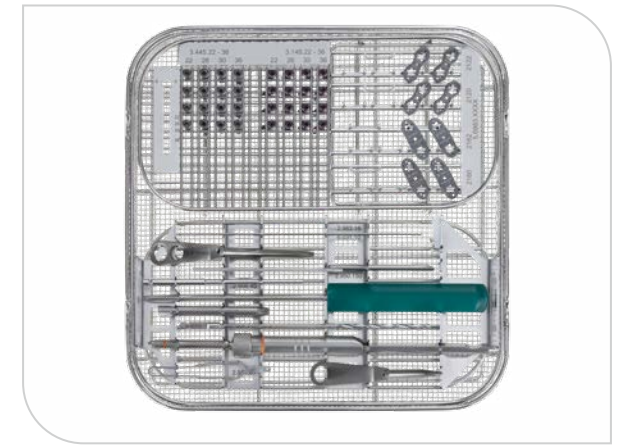

Set-Nr. 19.563.00 VaWiKo® EPI-Platte 4.0 vws ISK T

### Kortikalisschraube 4.0

- winkelstabil
- selbstschneidend
- Titan

### Durchbohrte Schraube 4.0

- Vollgewinde
- selbstschneidend
- selbstbohrend
- Titan; TiOB®

Innensechskant



Innensechskant

