

Alle Vorteile auf einen Blick

- **VaWiKo®-Löcher** erlauben Einsatz winkelstabiler und Standardschrauben
- **Schlankes Plattendesign mit versenkten Schraubenköpfen** trägt zur Schonung der Weichteile bei
- Die **VaWiKo® Laterale Distale Fibula-Platte** ermöglicht eine **korrekte Wiederherstellung** der Sprunggelenks-Anatomie **in Länge und Rotation** sowie eine **stabile Retention** der anatomisch reponierten Fraktur **in allen Richtungen**
- **Distale Verankerung** mit 4 Schrauben bietet **auch bei osteoporotischem Knochen** ausreichend Stabilität für eine frühfunktionelle Nachbehandlung mit Belastung
- Kirschnerdrahtlöcher ermöglichen eine temporäre Fixation der Platten
- Distales Plattenende **anatomisch angepasst**
- Möglichkeit, ein und/oder zwei Stellschrauben zu platzieren
- Behandlung langstreckiger Frakturen durch **verschiedene Plattenlängen**



Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für die **VaWiKo® Laterale Distale Fibula-Platte** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.



Königsee Implantate GmbH

Am Sand 4
07426 Allendorf | OT Aschau
GERMANY
info@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498 - 0

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

www.koenigsee-implantate.de

FIBULA-PLATTE

VaWiKo® Laterale Distale Fibula-Platte 3.5



Anwendungsmöglichkeiten

- Weber A-, B- und C-Frakturen nach Danis-Weber mit und ohne Verletzung der Syndesmose insbesondere Mehrfragmentfrakturen
- Refraktur/Implantatversagen bei konventioneller nicht winkelstabiler Osteosynthese
- Osteoporotische Frakturen
- Pseudarthrosen der distalen Fibula
- Osteotomien der distalen Fibula

Zielgruppe

Die Versorgung mit einer VaWiKo® Lateralen Distalen Fibula-Platte erfolgt bei ausgewachsenen Patienten.

Erhältliche Platten

VaWiKo® Laterale Distale Fibula-Platte

Rein-Titan

Oberfläche: Blau anodisiert

erhältlich mit 2, 3 und 5 Schaftlöchern

optional mit 7 Schaftlöchern

variabel winkelstabiles Plattensystem


Langloch zum Setzen einer Stellschraube

einheitliche Plattenausführung für links und rechts

anatomisch angepasste Plattenform

abgeflachtes Plattenende ermöglicht ein leichtes Implantieren

Set Fibula-Platten

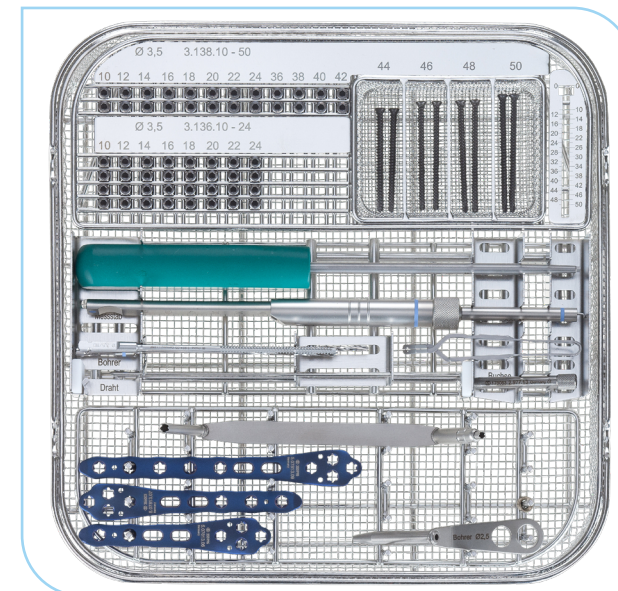

OP-Set Fibula-Platten mit Instrumenten

Information:

Der Systemname VaWiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Variabel winkelstabile Kombination“ ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung in variablen Winkeln kombiniert.

VaWiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

TiOB® ist ein in den EU-Staaten, in der Schweiz und in den USA eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

