

Alle Vorteile auf einen Blick

- geeignet für den deltoideopectoralen Zugang und den Deltasplit
- Möglichkeit der Fixation der Tuberkel an der Platte
- keine zusätzliche Gefährdung der wichtigen ventromedialen Durchblutung
- Erreichbarkeit des nach dorso-cranial häufig dislozierten Tuberculum majus
- gute Manipulierbarkeit der Fragmente durch vorgelegte Haltefäden
- bestehende Rotatorenmanschetten (partial-) rupturen können mitversorgt werden



Winkelstabile proximale Humerusplatte, Stahl

Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für die **Winkelstabile proximale Humerusplatte 6.0/4.5** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Deutschland

info@koenigsee-implantate.de


Fon: + 49 36738 498 - 550

Fax: + 49 36738 498 - 559

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

HUMERUSPLATTE 6.0/4.5

Winkelstabile proximale Humerusplatte

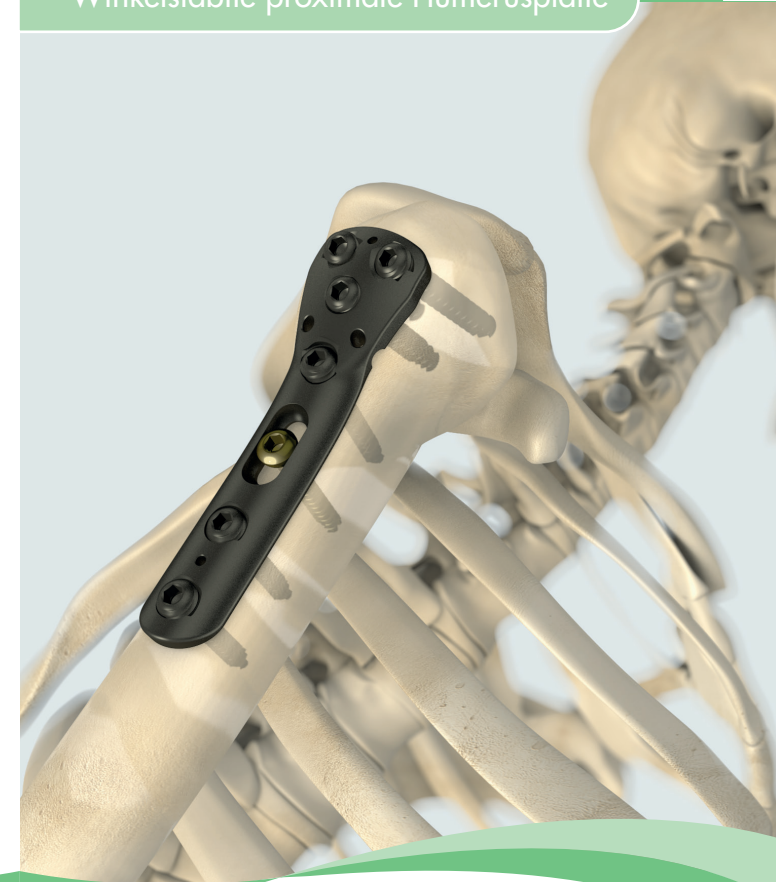

Winkelstabile proximale Humerusplatte, Titan

www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH/HeBo | Edition 01 | 2019-10

 **Königsee**
Implantate

Indikationen

2, 3, und 4 - Fragmentfrakturen des proximalen Humerus nach Neer, bei denen eine ausreichende knöcherne Substanz zur stabilen Schraubenverankerung gegeben ist

Zielgruppe

Die Versorgung mit einer winkelstabilen proximalen Humerusplatte für Schrauben 6.0/4.5 erfolgt bei erwachsenen Patienten.



Eigenschaften

Winkelstabile proximale Humerusplatte für Schrauben 6.0/4.5

Reintitan bzw. Implantatstahl

Titanimplantate - anodisiert
Stahlimplantate - elektropliert

3 Kopflöcher

Kombinationslöcher im Schaft für Standard oder winkelstabile Kortikalisschrauben Ø 4.5 mm

Winkelstabile Löcher im Kopfbereich für winkelstabile Spongiaschrauben Ø 6.0 mm

Langloch zur intraoperativen Ausrichtung der Platte

Plattenstärke 4.5 mm


Kirschnerdrahtfixationslöcher

Fadenlöcher für Rotatorenmanschettenrefixation

einheitliche Plattenausführung für links und rechts

anatomische Passform für den Humeruskopf

Set Humerusplatte 6.0/4.5

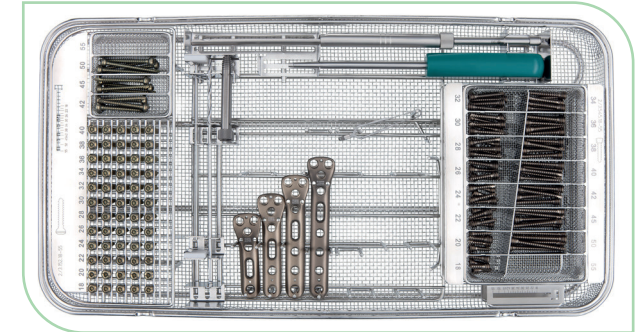

OP-Set Winkelstabile prox. Humerusplatten 6.0/4.5** mit Instrumenten u. Schrauben


Winkelstabile Kortikalisschraube



nnensechskant

- Ø 4.5 mm, Vollgewinde
- selbstschneidend, Titan**
- Längen*: 18 - 50 mm

Standard Kortikalisschraube

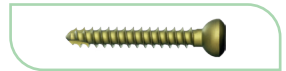

nnensechskant

- Ø 4.5 mm, Vollgewinde
- selbstschneidend, Titan**
- Längen*: 18 - 50 mm

Winkelst. Spongiaschraube



nnensechskant

- Ø 6.0 mm, Vollgewinde
- selbstschneidend, Titan**
- Längen*: 34 - 56 mm

* Optional sind kürzere und längere Schrauben erhältlich.

** Die Winkelstabilen proximalen Humerusplatten sowie die Schrauben sind auch als OP-Set in Stahl erhältlich.

selbsthaltende Schraubenpinzette



Sechskantschraubendreher



Bohrbuchse und Spiralbohrer



Messgerät mit Haken / Kirschnerdraht