

## LAPIDUS PLATTE 3.5

VaWiKo® Lapidus Platte 3.5  
LochØ5 plantar Stufe 2

### Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für

**VaWiKo® LAPIDUS PLATTE 3.5**

wecken konnten, melden Sie sich bei uns



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-550

oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.

### Alle Vorteile auf einem Blick

- **Höhere Primärstabilität und geringere Pseudarthrosenrate** im Vergleich zur dorsalen und medialen Platte bzw. Schraubenosteosynthese
- **Optimierte Biomechanik** durch plantare Plattenfixierung und Kompression der Arthrodeese bei Belastung
- Plattenlage **verhindert plantares Aufklappen** der Arthrodeese bei Belastung
- Geringeres Risiko einer iatrogenen Anhebung des Metatarsale 1
- Gute Abdeckung der Platte durch den Musculus abductor hallucis
- **Minimalinvasiv** durch kleine Plattengröße
- Dynamische Kompression möglich
- **OPTION5** – Variabel winkelstabiles Kombi-kompressionsloch für **5 Möglichkeiten der Verschraubung**
- **Frühzeitig belastungsstabile** Osteosynthese ohne Korrekturverlust



## Indikationen

- Ausgeprägter Hallux valgus et Metatarsus primus varus
- Hallux valgus-Korrektur mit hohem Intermetatarsalwinkel
- Instabilität/Hypermobilität des TMT-1-Gelenks
- Insuffizienz/Instabilität medialer Vorfußstrahl/Metatarsus primus elevatus
- Arthrose TMT-1-Gelenk
- Hallux valgus Rezidivoperation mit Rezidiv des Metatarsus primus varus
- Hallux valgus-Korrektur bei „schlechtem Weichteilstatus“ im Bereich des Großzehengrundgelenks
- Hallux valgus-Korrektur bei beginnender Planovalgus-Fehlstellung des Rückfußes

## Zielgruppe

- Die Versorgung mit einer Rückfußplatte erfolgt bei adulten Patienten.
- Es liegt keine Einschränkung auf ausgewählte ethnische Gruppen vor. Die Patientenklientel wird lediglich durch anatomische Parameter begrenzt.



### Information

Der Systemname VaWiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Variabel winkelstabile Kombination“ ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung in variablen Winkeln kombiniert. VaWiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

## Eigenschaften

■ **NEU: OPTION5** – Variabel winkelstabiles Kombi-kompressionsloch für 5 Möglichkeiten der Verschraubung: Standard; winkelstabil; variabel winkelstabil; Standard Kompression; winkelstabile Kompression (2)

- Zwei variabel winkelstabile Löcher für winkelstabile Kortikalisschrauben (1 und 4)
- Ovale Loch für Standardverschraubung (3)
- K-Draht Löcher zur temporären Fixation der Platte
- Anatomisch geformtes seitenspezifisches Plattendesign
- Plattenstärke 2.0 mm
- Reintitan; grün-blau anodisiert

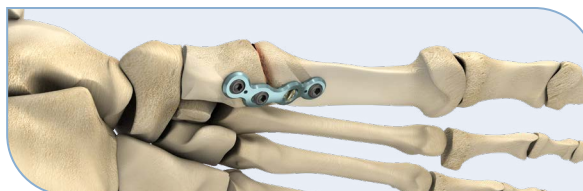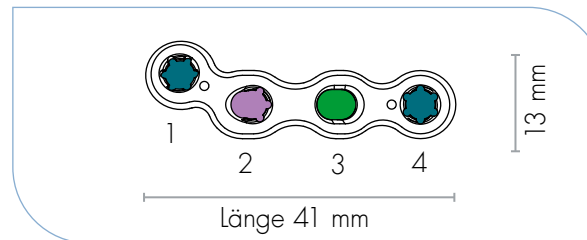

## Set Rückfußplatten 3.5 vws




Set Rückfußplatten 3.5 vws

**Kortikalisschraube 3.5 Kopf 5; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; TiOB®**

**Kortikalisschraube 3.5 Kopf 5; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; TiOB®**

Innensechskant

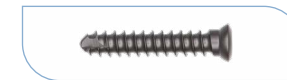

Innensechskant



### Information

Das Set Rückfußplatten 3.5 LochØ5 vws ist kombinierbar mit dem Set Vorfußplatten 2.7 vws.

