


## Alle Vorteile auf einen Blick

- **Perkutane** Versorgung
- Schraubendurchmesser  $\varnothing$  7.5 mm erlaubt die Verwendung eines stabilen Führungsdrahtes  $\varnothing$  2.8 mm
- **Positionierung** der Schraube **vor der Zementapplikation**
- Speziell abgestimmtes **Applikationssystem**
- **Reduziertes Risiko** für Dislokation des Zements und Komplikationen wie Nervenkompression und Embolie
- Vollgewinde **selbstbohrend** und selbstschneidend; Teilgewinde selbstbohrend, **rückschneidend** und **selbstschneidend**
- Mit und ohne **Unterlegscheibe** implantierbar

## Indikation

- **Frakturen und Verletzungen:**  
Osteoporotische sowie nichtosteoporotische Frakturen am Becken
- **Erkrankungen:**  
Arthrose im Iliosakralgelenk

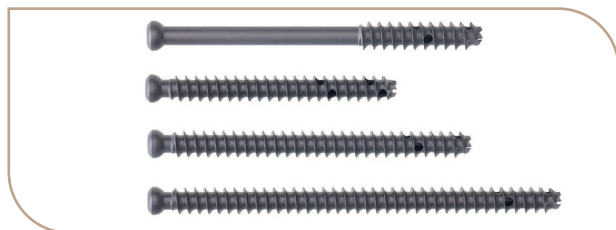

## Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für die **TIS™-Schrauben** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-550

#### Information


Der Name TIS™ leitet sich aus der Bezeichnung „Transiliosakral-schraube“ ab. Produkte mit dem Zusatz „™“ sind Markenzeichen von Königsee Implantate GmbH.

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

## TIS™-SCHRAUBE


Transiliosakral- und Beckenschraube

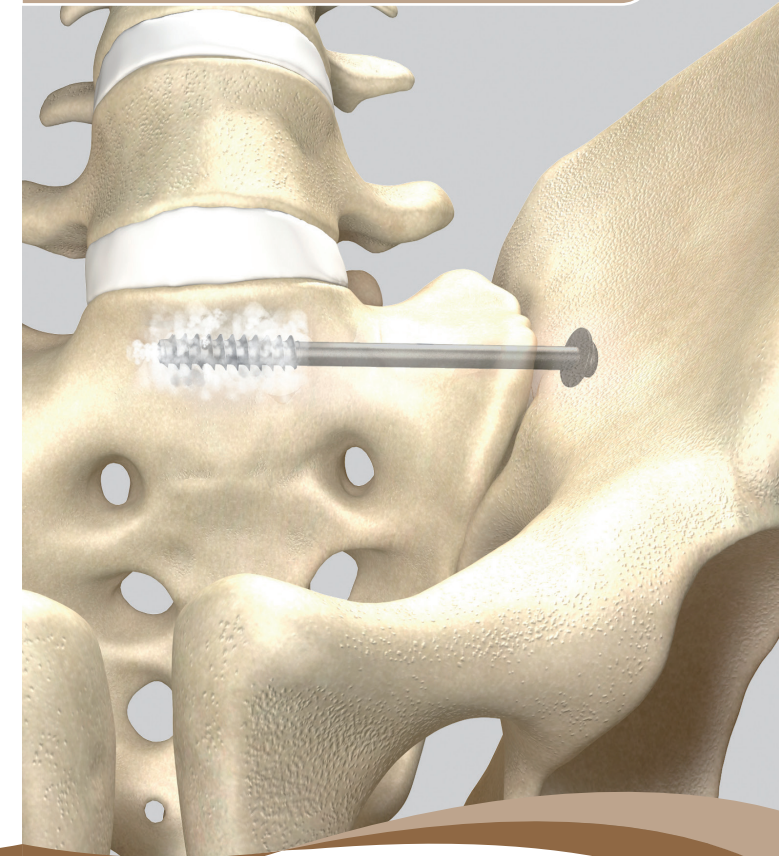


## Zementapplikation

Die kanülierten und fenestrierten TIS™-Schrauben ermöglichen ein präzises und dosiertes Zementieren im osteoporotischen Knochen, nach Kontrolle der Schraubenlage.

Abhängig von der notwendigen Kompression im Fraktur- bzw. Gelenkspalt kann eine Voll- bzw. Teilgewindeschraube eingesetzt werden.

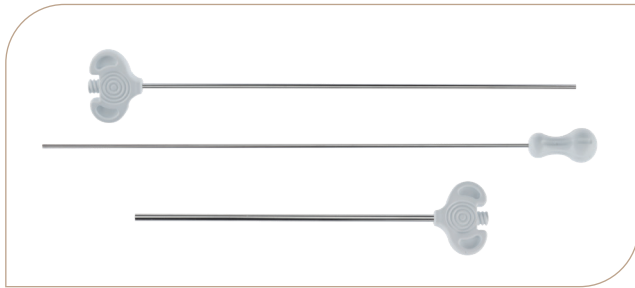

Das SPASY™-Zement-Applikationssystem ermöglicht durch das Führungsrohr das sichere und schnelle Auffinden der liegenden TIS™-Schrauben und sorgt für die sichere und saubere Zementapplikation.

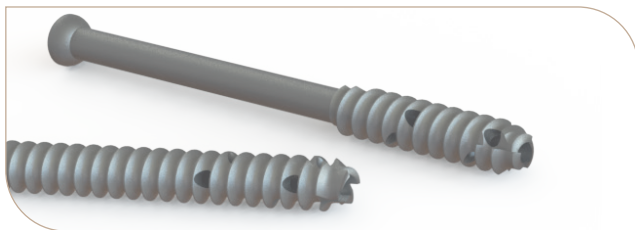

## Erhältliche Schraubenlängen



TiOB-Oberfläche*	
Vollgewinde	Teilgewinde 32 mm
<b>Längen</b> 50 – 200 mm	<b>Längen</b> 50 – 200 mm
In 5 mm Schritten	
Alle Schrauben auch steril verpackt erhältlich	

### Information


TiOB® beschreibt eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.

## Instrumente-Set 7.5

Das Instrumente-Set für alle Längen (steril verpackt als auch nicht steril verpackt) der TIS™-Schraube.

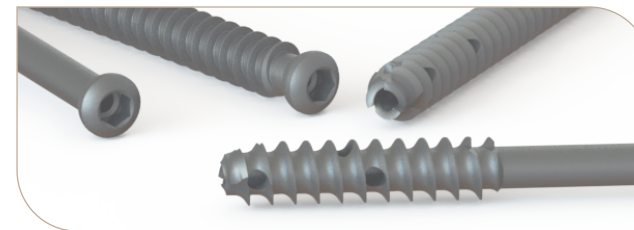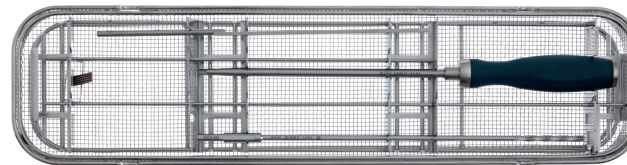

## TIS™-Set

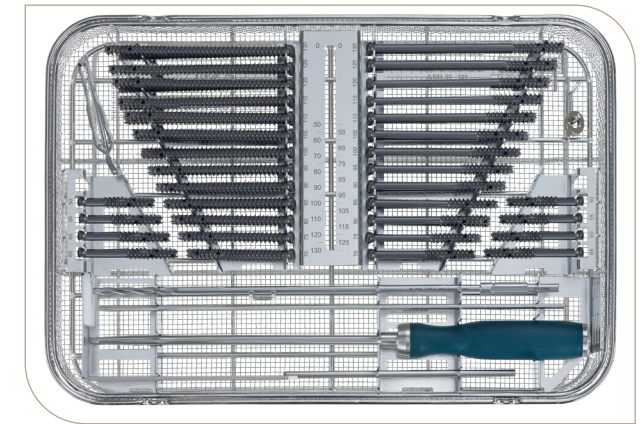

OP-Set TIS™-Schrauben Ø 7.5 mm mit Instrumenten

TIS™-SET	
Vollgewinde	Gewinde 32 mm
Länge 50 – 130 mm	Länge 50 - 130 mm

## Erweiterungs-Set

ERWEITERUNGS-SET	
Vollgewinde	Gewinde 32 mm
Länge 135 – 165 mm	Länge 135 mm

Erweiterungs-Set TIS™-Schrauben Ø 7.5 mm

