

## Alle Vorteile auf einen Blick

- **Winkelstabile durchbohrte  $\varnothing$  6.0 mm Schraube** dient als stabiler Kraftträger zur sicheren Osteosynthese
- **Schlankes Plattendesign mit versenkten Schraubenköpfen** trägt zur Schonung der Weichteile bei
- **Alle Vorzüge** der bekannten Eigenschaften eines **Fixateur Interne** durch winkelstabile Fixation
- **Kompression** auf den Osteotomiespalt durch **DC-Loch** im Schaftbereich
- Einheitliches Plattendesign für links und rechts
- Anlageradius für verbesserte Anpassung am Knochen und Erhöhung der **Implantatstabilität**
- **Schonung des Periosts** durch Reduzierung der Auflagefläche an der Unterseite des Implantats
- Einfache Implantation durch **winkeleinstellbares Zielgerät**
- **Zeitersparnis** durch einfache und schnelle Implantation

## Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für die **WiKo® Proximale Femur-Umstellungsplatte** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.



### Königsee Implantate GmbH


Am Sand 4  
07426 Allendorf | OT Aschau  
GERMANY

info@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498 - 0

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

## FEMUR-UMSTELLUNGSPLATTE

WiKo® Proximale Femur-Umstellungsplatte  
3.5/6.0 für Kinder

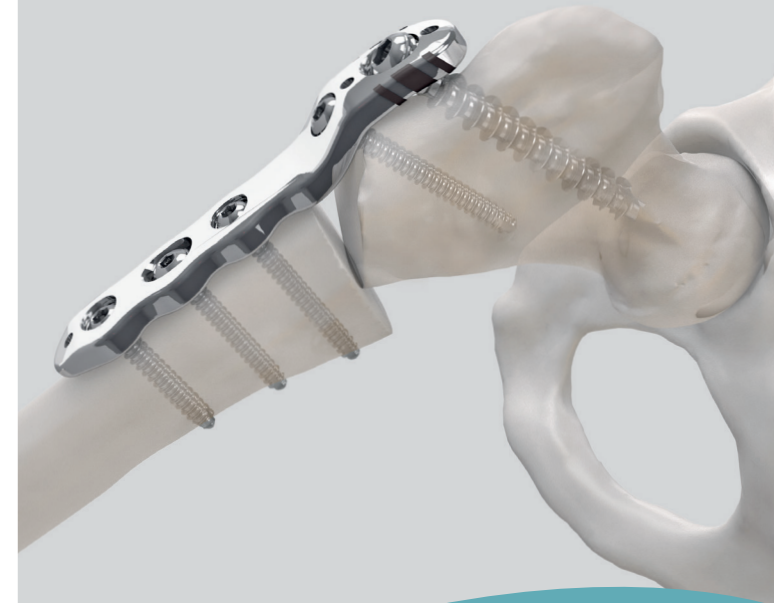

[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

Copyright © Königsee Implantate GmbH/HeBo | Edition 01 | 10/2017

 **Königsee**  
Implantate

## Indikationen

- Hüftdysplasie und Hüftluxation
- Coxa valga oder Coxa valga et antetorta
- Luxation des Femurkopfes bei neuromuskulären Erkrankungen

## Zielgruppe

Die WiKo® proximale Femur-Umstellungsplatte 3.5/6.0 ist für die Versorgung von Kindern bestimmt.

- Kinder mit kleinem Schenkelhalsdurchmesser
- Das winkelstabile Plattensystem wurde speziell für sehr kleine, häufig auch hypotrophe und/oder mehrfach behinderte Kinder entwickelt.

## Erhältliche Platten

### WiKo® proximale Femur-Umstellungsplatte 3.5/6.0; Stahl

3 Loch; Bogentiefe 4 mm; Länge 70 mm

4 Loch; Bogentiefe 4 mm; Länge 81 mm

3 Loch; Bogentiefe 6 mm; Länge 73 mm

4 Loch; Bogentiefe 6 mm; Länge 84 mm

3 Loch; Bogentiefe 8 mm; Länge 77 mm

Optional erhältlich


4 Loch; Bogentiefe 8 mm; Länge 88 mm

#### Information:


Der Systemname WiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Winkelstabile Kombination“ ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung kombiniert.

WiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

## Set Femur-Umstellungsplatte

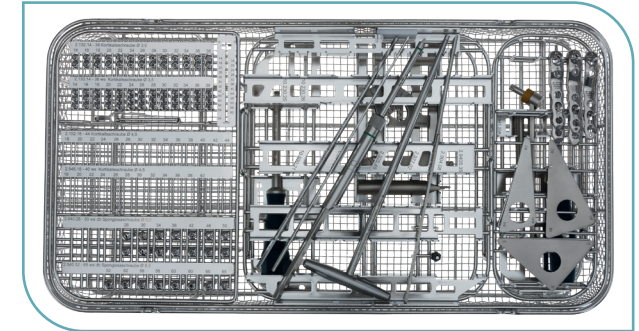

OP-Set Femur-Umstellungsplatten mit Instrumenten, komplett

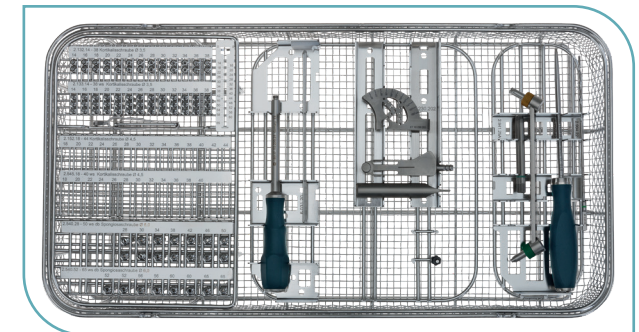

OP-Set Femur-Umstellungsplatten mit Instrumenten, untere Ebene

