


## Alle Vorteile auf einen Blick

- Das geformte, anatomische Plattendesign erhöht die Anwendungssicherheit und reduziert die Operationszeit.
- Anwendung bei artikulären und extraartikulären distalen Tibiafrakturen.
- Der alleinige Einsatz der Kleinfragment-Dimension reduziert Lagerhaltungskosten und erleichtert die Aufarbeitung der Siebe.
- Der winkelstabile Schraubenverlauf im metaphysären Tibiagelenkblock erfasst alle Hauptfragmente der Epi-/ Metaphyse.
- Der ventrale Plattenausleger gewährleistet die hohe Osteosynthesestabilität der fixierten dorsalen Knochenfragmente.
- Variabel winkelstabile Schraubenfixation im metaphysären Plattenteil. Konventionelle oder winkelstabile Schraubenbelegung im diaphysären Plattenteil.
- Längere Platten zur Versorgung von 2-Etagen Frakturen auf Anfrage.

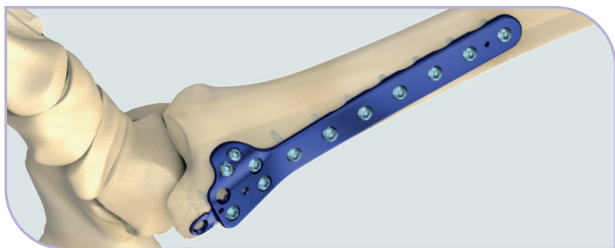

## Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für die **DISTALE TIBIAPLATTE** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Deutschland

[info@koenigsee-implantate.de](mailto:info@koenigsee-implantate.de)

Fon: + 49 36738 498 - 550


Fax: + 49 36738 498 - 89 550

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

## DISTALE TIBIAPLATTE

Variabel winkelstabile Tibiaplatte

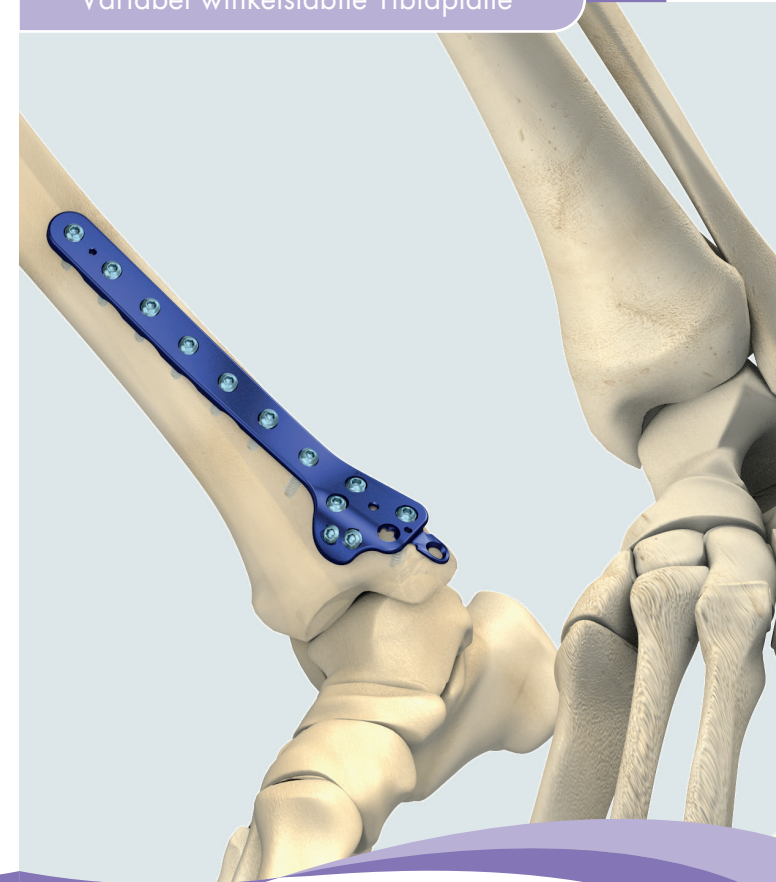

 **Königsee**  
Implantate

## Anwendungsmöglichkeiten

- Das Implantat wurde für die operative Versorgung von Frakturen des Pilon tibiale wie auch extraartikulärer Frakturen der distalen Tibia entwickelt.

## Zielgruppe

- Die Versorgung mit einer Variabel winkelstabilen distalen Tibiaplatte erfolgt bei adulten Patienten.

## Eigenschaften

### Variabel winkelstabile distale Tibiaplatte

Anatomisch angepasste Plattenform

Plattenausführung für links und rechts


Variabel winkelstabile Löcher für winkelstabile Kortikalisschrauben  $\varnothing$  3.5 mm

3 bis 15 Plattenlöcher

Blau anodisiert

Rein Titan

## Set Distale Tibiaplatte

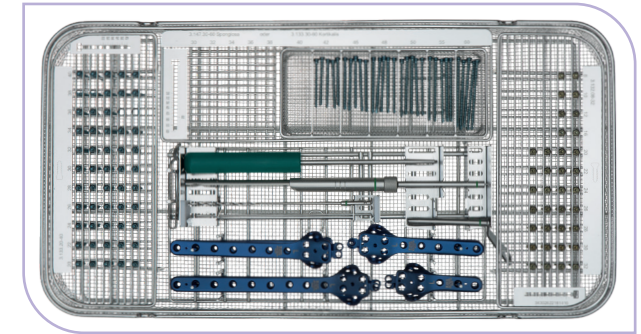

OP-Set Distale Tibiaplatte mit Instrumenten und Schrauben

