


Alle Vorteile auf einem Blick

- **Variabel winkelstabil**es Platten-Schrauben-System
- **Zwei verfügbare Kopfbreiten** (6 bzw. 7 Löcher)
- **Zwei verfügbare Längen** (4-Loch, 8-Loch)
- Verwendung **winkelstabiler Kortikalisschrauben** Ø 4.0 mm mit ISR 15
- **Temporäre Retention** reponierter Gelenkfragmente mit Hilfe von **Kirschnerdrähten**
- **Refixierung** von Kapsel und Meniskusbasis **mittels Nähten** durch separate, **unterschnittene Öffnungen** Ø 1.8 mm am proximalen Plattenrand
- **Proximale Schraubenreihe** für das Einbringen von **4 bzw. 5 Schrauben**, unmittelbar subchondral zur **verlässlichen Abstützung** der gesamten Plateaufläche nach der Rekonstruktion
- **Separate Stößel** ermöglichen die Reposition imprimierter Gelenkflächenfragmente in allen Bereichen des Plateaus **durch integrierte Öffnung in der Platte**
- Zum Besetzen der **Kopflöcher im Vorzugswinkel** steht **optional ein Zielblock** zur Verfügung

separat erhältliches Stößel-Set mit Griffstück

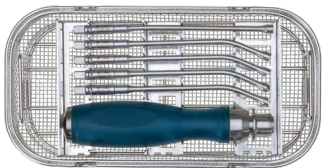

Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für

VaWiKo® TIBIAKOPFPLATTE 4.0

wecken konnten, melden Sie sich bei uns



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498-550


oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.

www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH/StZi | Edition 03 | 2021-04

TIBIAKOPFPLATTE

VaWiKo® Tibiakopfplatte 4.0

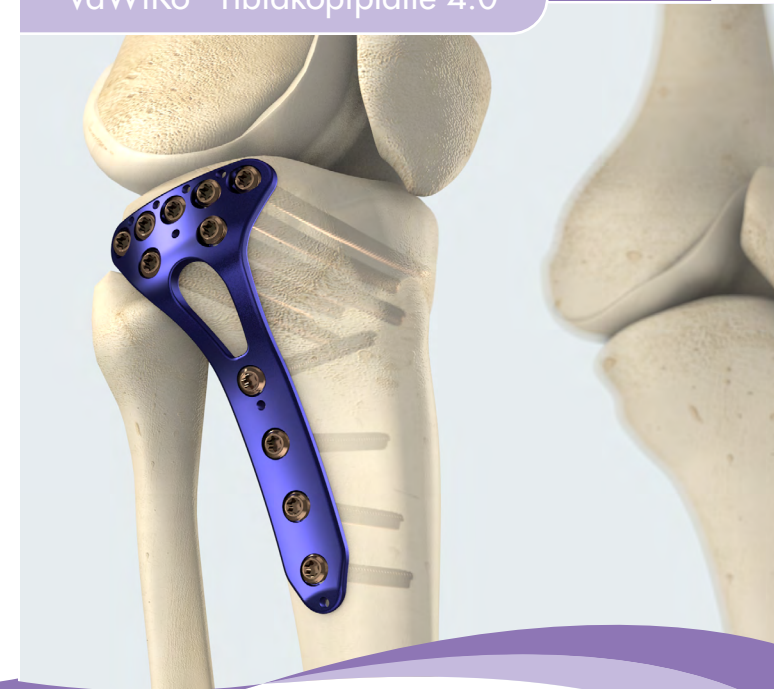

Indikationen

- Laterale monocondyläre Tibiakopffrakturen (Typ I, II, III, VI nach Schatzker, Typ 41-B1, B2, B3 nach AO)
- Laterale Tibiakopffrakturen mit und ohne metaphysäre Frakturkomponente
- Periprothetische proximale Tibiafrakturen


Zielgruppe

- Die Versorgung mit einer VaWiKo®* Tibiakopfplatte 4.0 erfolgt erfolgt bei ausgewachsenen Patienten.

Eigenschaften

- Anatomisch geformte Platten mit variabel winkelstabilen Löchern für den Einsatz winkelstabiler Kortikalisschrauben Ø 4.0 mm
- Unterschiedliche Plattenausführung mit 6 bzw. 7 Löchern im Plattenkopf
- Plattenausschnitt zur Reposition der Gelenkfläche mittels Stößeln
- Kirschnerdrahtlöcher für Kirschnerdrähte Ø 1.8 mm zur temporären Plattenfixierung und Reposition von Frakturfragmenten
- Plattenstärke 3 mm


Set VaWiKo® Tibiakopfplatte 4.0 ISR T

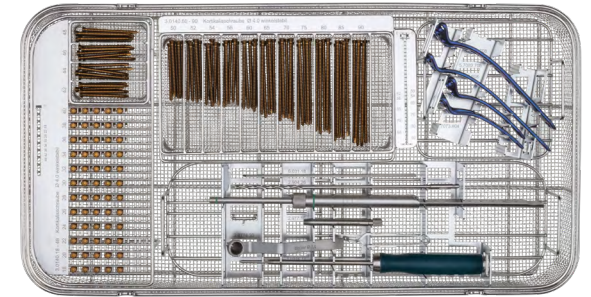

OP-Set VaWiKo® Tibiakopfplatte 4.0 ISR T mit Instrumenten

**Kortikalisschraube 4.0
ws ISR15 ss**
Vollgewinde; Titan

★ Innensechsrund

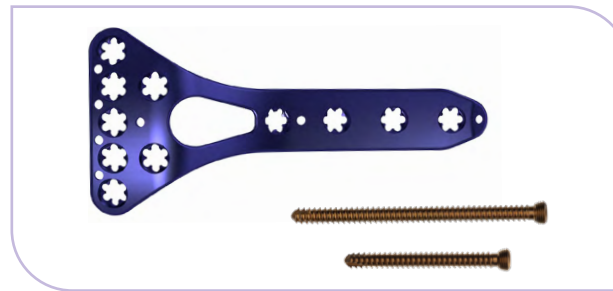

Information

Der Systemname VaWiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Variabel winkelstabile Kombination“ ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung in variablen Winkeln kombiniert.

VaWiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.



separat erhältliche Stößel

