


DENS-AXIS- VERSCHRAUBUNG

Frakturkompression
Schraube 3.0/4.0

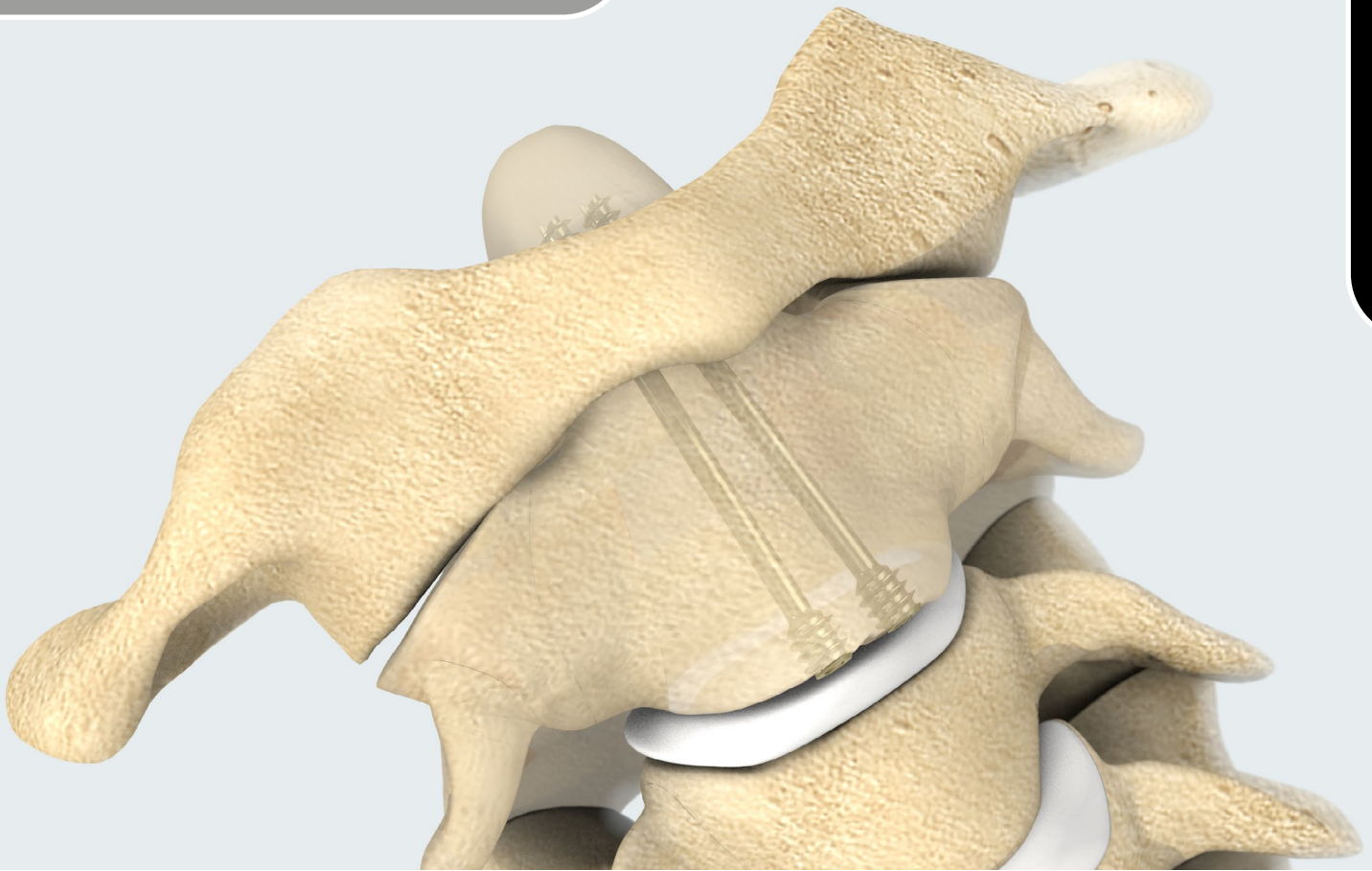

Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db

3.123.20	Frakturkompressionsschraube;Ø3/Ø4x20;Gew.6;sb;ss;lØ1.3;T	 4047075088515
3.123.22	Frakturkompressionsschraube;Ø3/Ø4x22;Gew.6;sb;ss;lØ1.3;T	 4047075088652
3.123.24	Frakturkompressionsschraube;Ø3/Ø4x24;Gew.6;sb;ss;lØ1.3;T	 4047075088539
3.123.26	Frakturkompressionsschraube;Ø3/Ø4x26;Gew.6;sb;ss;lØ1.3;T	 4047075088546
3.123.28	Frakturkompressionsschraube;Ø3/Ø4x28;Gew.6;sb;ss;lØ1.3;T	 4047075088553
3.123.30	Frakturkompressionsschraube;Ø3/Ø4x30;Gew.6;sb;ss;lØ1.3;T	 4047075088454
3.123.32	Frakturkompressionsschraube;Ø3/Ø4x32;Gew.6;sb;ss;lØ1.3;T	 4047075088805
3.123.34	Frakturkompressionsschraube;Ø3/Ø4x34;Gew.6;sb;ss;lØ1.3;T	 4047075088669
3.123.36	Frakturkompressionsschraube;Ø3/Ø4x36;Gew.6;sb;ss;lØ1.3;T	 4047075088676
3.123.38	Frakturkompressionsschraube;Ø3/Ø4x38;Gew.6;sb;ss;lØ1.3;T	 4047075088683
3.123.40	Frakturkompressionsschraube;Ø3/Ø4x40;Gew.6;sb;ss;lØ1.3;T	 4047075088690
3.123.42	Frakturkompressionsschraube;Ø3/Ø4x42;Gew.6;sb;ss;lØ1.3;T	 4047075088706
3.123.44	Frakturkompressionsschraube;Ø3/Ø4x44;Gew.6;sb;ss;lØ1.3;T	 4047075088560

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Kanülierte Schrauben und kanüliertes Instrumentarium
- Erleichterte Handhabung durch integrierten, vorgegebenen Winkel der Doppelbohrbuchse
- Optimaler Schutz der umgebenen Halsweichteile durch die in situ positionierte Doppelbohrbuchse mit Reduktion des Zugangstraumas

Indikationen

- Densfrakturen, die sich für eine ventrale Verschraubung eignen
- Am geeignetsten sind die Dens Querfrakturen Typ II Anderson/D'Alonzo sowie Densfrakturen Typ I und III bei geeignetem Frakturverlauf, soweit ausreichend Knochenmasse distal und kranial von der Schraube gefasst wird.


Zielgruppe

- Die operative Behandlung mit den aufgeführten Implantaten erfolgt bei adulten Patienten.
- Kinder oder Jugendliche, bei denen das Wachstum noch nicht abgeschlossen ist, dürfen nicht mit den aufgeführten Produkten versorgt werden.
- Es liegt keine Einschränkung auf ausgewählte ethnische Gruppen vor.
- Die Patientenklientel wird lediglich durch anatomische Parameter begrenzt.

Eigenschaften

- Titanlegierung mit goldgelb anodisierter Oberfläche
- selbstbohrend, selbstschneidend
- Doppelgewindeschraube mit Kanülierung
- Innendurchmesser 1.3 mm
- Kopfgewinde mit \varnothing 4.0 mm , Länge 3.5 mm
- Gewinde Schraubenspitze mit \varnothing 3.0 mm, Länge 6 mm
- Schraubenlängen von 20 mm bis 44 mm in 2 mm Schritten

Set Dens-Axis Verschraubung

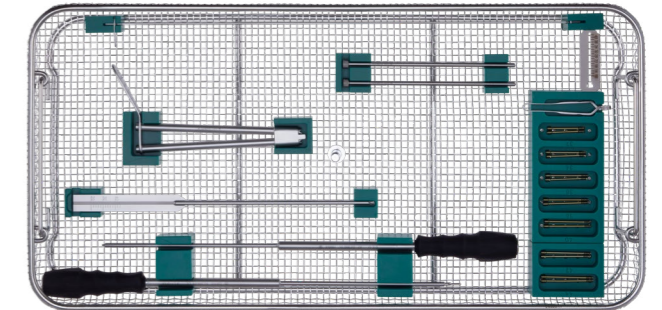

Set-Nr. 19.380.10 Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db; Titan		
3.123.32	Länge 32 mm; Gewinde 6	2
3.123.34	Länge 34 mm; Gewinde 6	2
3.123.36	Länge 36 mm; Gewinde 6	2
3.123.38	Länge 38 mm; Gewinde 6	2
3.123.40	Länge 40 mm; Gewinde 6	2
3.123.42	Länge 42 mm; Gewinde 6	2
3.123.44	Länge 44 mm; Gewinde 6	2

Optional erhältlich:

3.123.20	Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db
3.123.22	Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db
3.123.24	Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db
3.123.26	Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db
3.123.28	Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db
3.123.30	Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db

Hinweis für Siebkörbe mit POM C natur- Blöcken

Siebkorbnummer	19.3811.10
Set-Nummer	19.3801.10

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
10.266.01	Vorböhrer mit Griff und Fräskopf; \varnothing 2.1 mm x 352 mm; Fräser \varnothing 3.0 mm; durchbohrt; Innen \varnothing 1.3 mm	1
10.266.02	Sechskantschraubendreher mit Griff; SW 2; Länge 350 mm; durchbohrt; Innen \varnothing 1.3 mm	1
10.266.03	Doppelbohr- und Gewebeschutzhülse; \varnothing 7.0 mm x 140 mm; Innen \varnothing 4.2 mm	1
10.266.034	Hülsen für Doppelbohrbuchse	2
10.266.04	Messstab für 10.266.03	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1

Drähte


2.984.12/400	Führungsdraht; \varnothing 1.2 mm x 400 mm; Gewinde 10; Stahl	5
--------------	---	---

Siebkorb


19.381.10	Siebkorb mit Einsatz für Dens-Verschraubung	1
-----------	---	---

Erhalten Sie die Instrumente auch in folgendem Set:
DENS-Axis-Verschraubung ISK INSTRUMENTE – Set-Nr. 19.380.10I


Implantation der Frakturkompression Schraube

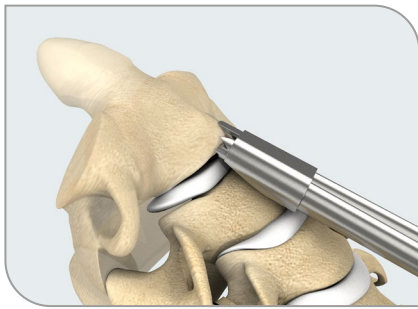


Positionierung Doppelbohrbuchse

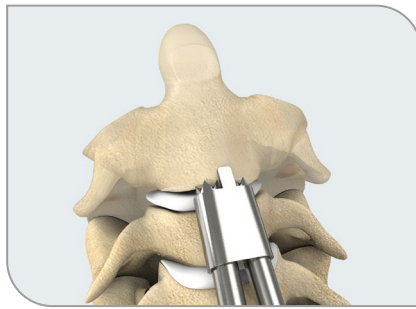


Positionierung Doppelbohrbuchse

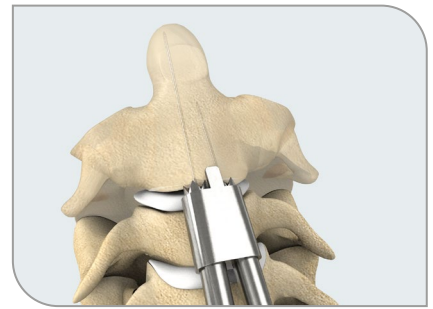

Einbringen der Drähte

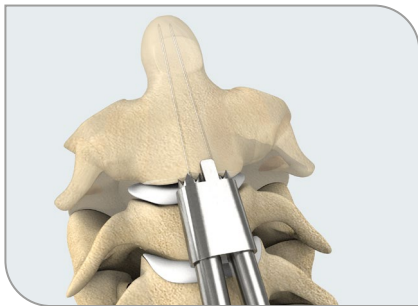


Platzierte Drähte

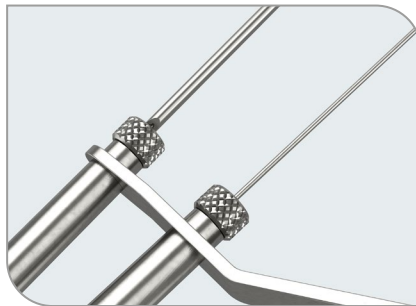


Messen der Schraubenlänge




Ablesen der Schraubenlänge

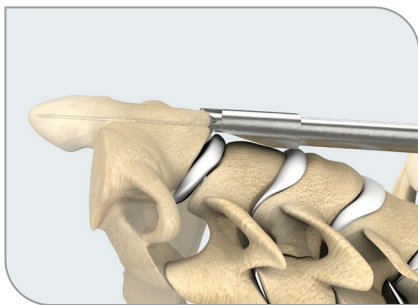

Knochenkontakt Doppelbohrbuchse
während Messvorgang

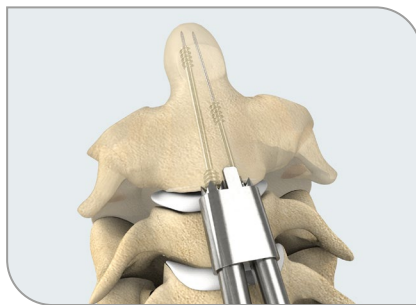

Eindreihen der Schrauben

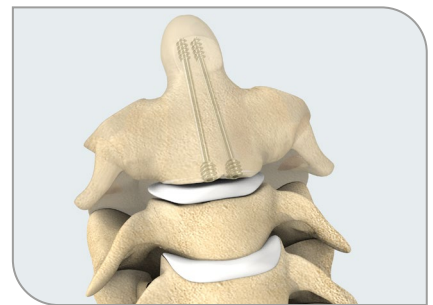

Implantierte Schrauben

Ihr Kontakt zu uns



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf/Thüringen
Deutschland

Fon: + 49 36738 498 - 550

bestellung@koenigsee-implantate.de
www.koenigsee-implantate.de

Dieses Dokument ersetzt weder eine OP-Anleitung
noch eine fachliche Einweisung zur Anwendung des
Produktes. Ausführliche Informationen finden Sie unter
<https://ksi.online-ifu.com>

CE 0197

Dens-Axis-Verschraubung
Frakturkompression Schraube 3.0/4.0
StZi | Edition 03 | 2023-02

 **Königsee**
Implantate