

# LC-TITANBAND

Low-Contact-Titanband mit Schnalle

Königsee  
Implantate

LC-Titanband



LC-Titanband mit Schnalle, Titan

7.440.01

8.0 mm x 0.4 mm; Länge 260 mm



4 047075 128938

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Geringe Osseointegration durch gleichmäßig verteilte Druckspannungen auf den Knochen (im Vergleich zu Seilen und Drähten)
- Noppen auf der „knochenzugewandten“ Seite verhindern das Verrutschen des Bandes und verringern zusätzlich die Osseointegration.
- Hohe Bruchfestigkeit
- Metallentfernung deutlich einfacher im Vergleich zu Seilen oder Drähten
- Band ist nachspannbar
- Universeller Einsatz an Femur und Humerus
- Wie anhand umfangreicher Untersuchungen nachgewiesen, kommt es zu keiner Störung der periostalen Durchblutung.





## Zielgruppe

- Die Versorgung mit dem LC-Titanband erfolgt bei ausgewachsenen Patienten.
- Es liegt keine Einschränkung auf ausgewählte ethnische Gruppen vor. Die Patientenklientel wird lediglich durch anatomische Parameter begrenzt.

## Eigenschaften

- Die dem Knochen zugewandte Seite besitzt auf 70 mm Länge eine genoppte Struktur.
- Ansonsten hat das Titanband eine vollständig glatte Oberfläche.
- An einem Ende befindet sich eine Aussparung zum Einhängen des Bandes in das Führungsinstrument.
- Am gegenläufigen Ende ist die Schnalle zum Fixieren des Bandes.



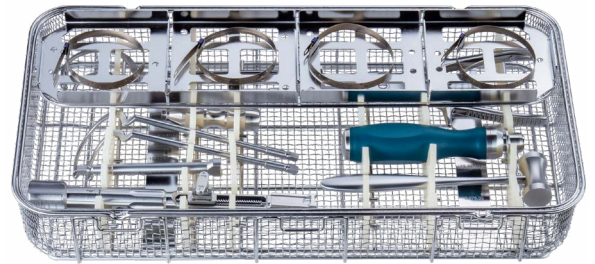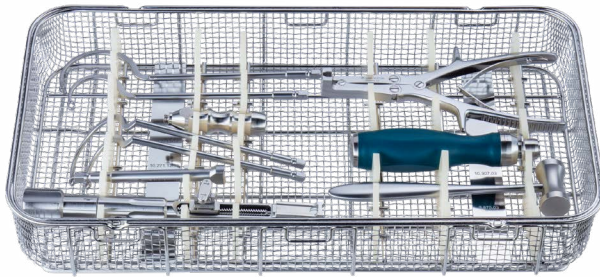

Set-Nr. 19.519.00  
2 Ebenen-Ansicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate</b>		
<b>LC-Titanband mit Schnalle</b>		
7.440.01	8.0 mm x 0.4 mm; Länge 260 mm	4


Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Siebkorb</b>		
19.519.10	Siebkorb m.Einsatz f.Instrumente Titanband	1

<b>Instrumente</b>		
10.271.11/65	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; gerade; Ø 65 mm; Länge 225 mm	1
10.271.12/65	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; schräg; Ø 65 mm; Länge 185 mm	1
10.271.11/45	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; gerade; Ø 45 mm; Länge 205 mm	1
10.271.12/45	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; schräg; Ø 45 mm; Länge 175 mm	1
10.307.03	Griffstück mit 1/4"-Kupplung; Länge 162 mm	1
10.271.20	Universalspanngerät für Bänder bis 8 mm x 0.4 mm/Seile bis Ø 2.0 mm; Länge 220 mm	1
10.271.03	Stößel f.LC-Titanband 8.0 mm x 0.4 mm; 1/4"-Kupplung; Länge 125 mm	1
10.271.05	Kraftschneider für LC-Titanband 8.0 mm x 0.4 mm; Länge 260 mm	1
2.975.03	Hammer aus Metall; 300 g schwer	1




Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.


# Implantation LC-Titanband

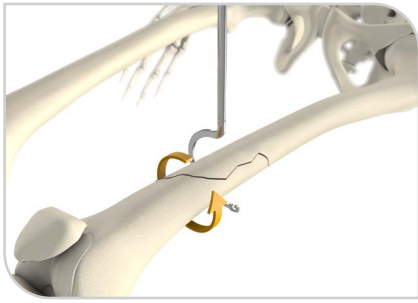


Umfahren

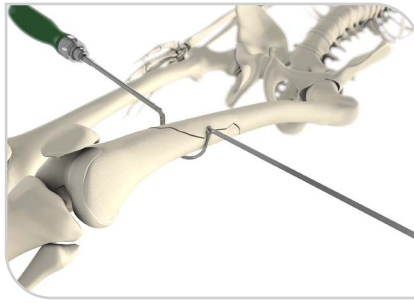


Band einhaken

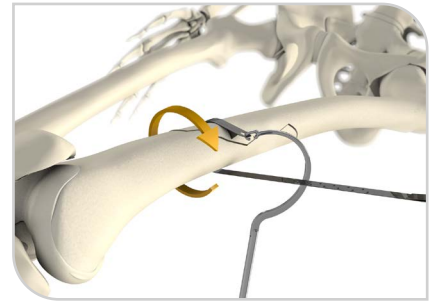


Band durchziehen

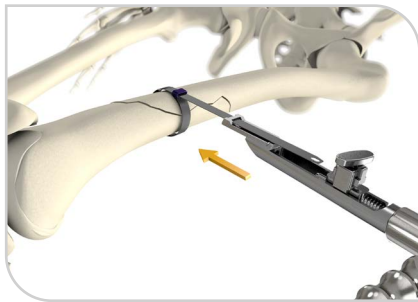


Band im Universalspanngerät einziehen

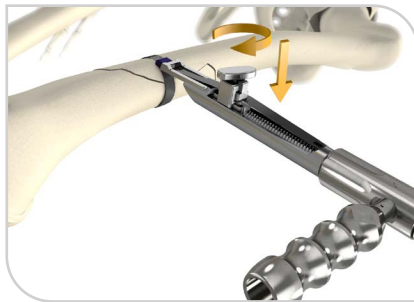


Band einspannen

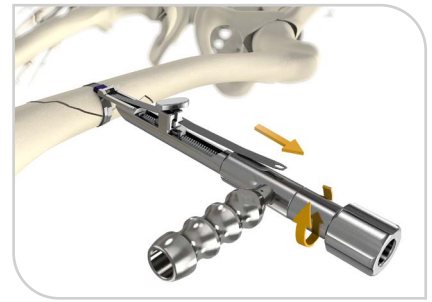

Band spannen

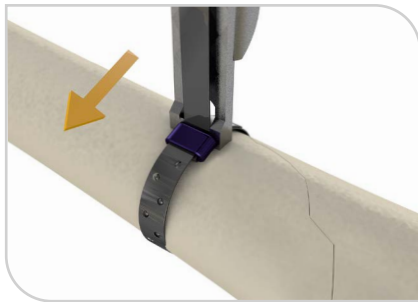

Band 90° knicken

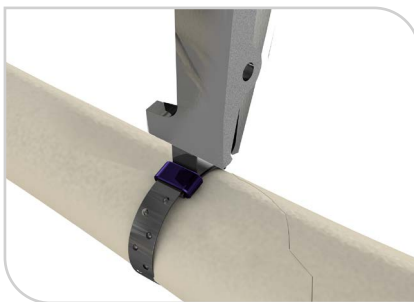

Band kürzen



Befestigtes Band

## Ihr Kontakt zu uns



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf/Thüringen  
Deutschland

Fon: + 49 36738 498 - 550

bestellung@koenigsee-implantate.de  
www.koenigsee-implantate.de



Dieses Dokument ersetzt weder eine OP-Anleitung noch eine fachliche Einweisung zur Anwendung des Produktes. Ausführliche Informationen finden Sie unter <https://ksi.online-ifu.com>

**CE 0197**

LC-Titanband  
Low-Contact-Titanband mit Schnalle  
KrMo | Edition 04 | 2023-12

