

Alle Vorteile auf einen Blick

- **Geringe Osseointegration** durch gleichmäßig verteilte Druckspannungen auf den Knochen (im Vergleich zu Seilen und Drähten)
- **Noppen** auf der „knochenzugewandten“ Seite verhindern das Verrutschen des Bandes und verringern zusätzlich die Osseointegration.
- **Hohe Bruchfestigkeit**
- **Metallentfernung deutlich einfacher** im Vergleich zu Seilen oder Drähten, dadurch **verkürzte OP-Zeit**
- Band ist **nachspannbar**
- **Universeller Einsatz** an Femur und Humerus
- Wie anhand umfangreicher Untersuchungen nachgewiesen, kommt es zu keiner Störung der **periostalen Durchblutung**.

Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für die **LC-Titanband** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter.



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf/Thüringen
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498 - 550

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.



LC-TITANBAND

Low-Contact-Titanband mit Schnalle



www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH
Kr/Mo | Edition 04 | 2023-12



 **Königsee**
Implantate

Zielgruppe

Die Versorgung mit dem LC-Titanband erfolgt bei ausgewachsenen Patienten.

Universalspanngerät mit LC-Titanband



Hammer und Kraftschneider



Umführungsinstrument mit Griff



Eigenschaften

LC-Titanband

Material: Rein-Titan

Die dem Knochen zugewandte Seite besitzt auf 70 mm Länge eine genoppte Struktur.

An einem Ende befindet sich eine Aussparung zum Einhaken des Bandes in das Umführungsinstrument.

Am gegenläufigen Ende befindet sich die Schnalle zum Fixieren des Bandes


Länge: 260 mm

Dicke: 0.4 mm

Breite: 8.0 mm

Passendes Instrumentarium inklusive Lagerungssystem steht im Set LC-Titanband mit Schnalle (Set-Nr. 19.519.00) zur Verfügung.

Set LC-Titanband

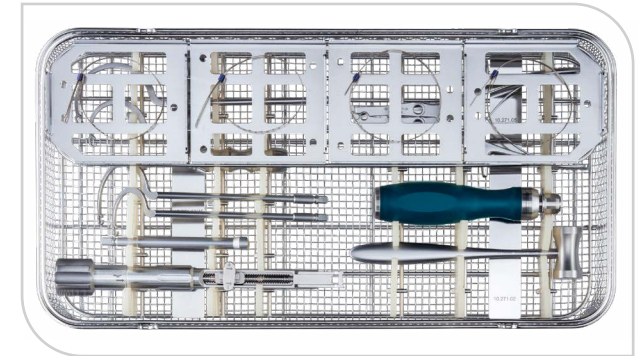

Set LC-Titanband komplett mit Bändern



Stößel



Universalspanngerät

