

Alle Vorteile auf einen Blick

- **Geringe Osseointegration** durch gleichmäßig verteilte Druckspannungen auf den Knochen (im Vergleich zu Seilen und Drähten)
- **Noppen** auf der „knochenzugewandten“ Seite verhindern das Verrutschen des Bandes und verringern zusätzlich die Osseointegration.
- **Hohe Bruchfestigkeit**
- **Metallentfernung** deutlich einfacher im Vergleich zu Seilen oder Drähten, dadurch **verkürzte OP-Zeit**
- Band ist **nachspannbar**.
- **Universeller Einsatz** an Femur und Humerus
- Wie anhand umfangreicher Untersuchungen nachgewiesen, kommt es zu keiner Störung der **periostalen Durchblutung**.
- **Verbesserte Handhabung** und erleichterte Kraftübertragung durch einen **optional verwendbaren Aufsatz** für den Spindelgriff des Universalspanngerätes

Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für das **LC-TITANBAND** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter.



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Deutschland



bestellung@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498 - 550

Auch mit Inkrafttreten der MDR sind unsere Produkte weiterhin NICHT STERIL oder STERIL VERPACKT erhältlich.



LC-TITANBAND

Low-Contact-Titanband mit Schnalle

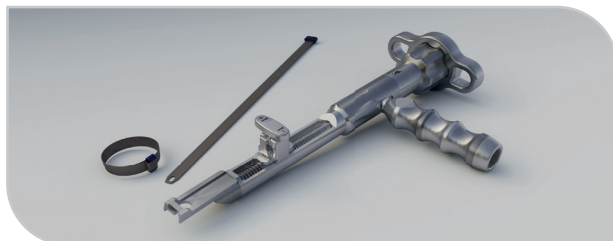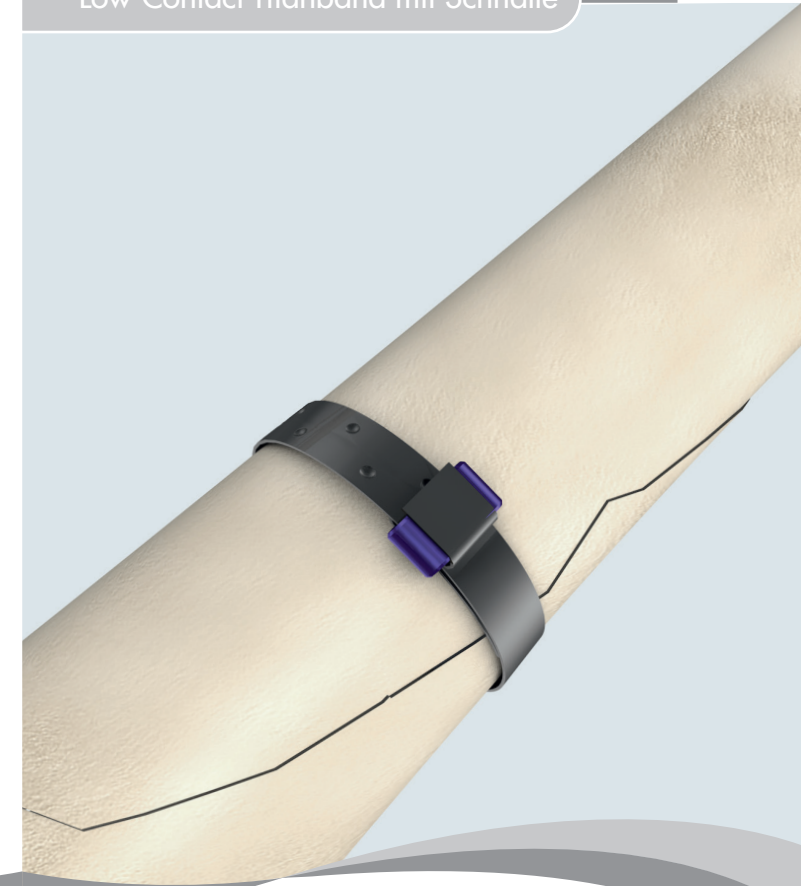

www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH
KrMo | Edition 05 | 2025-06



 **Königsee**
Implantate

Zielgruppe

Die Versorgung mit dem LC-Titanband erfolgt bei ausgewachsenen Patienten.

Universalspanngerät mit LC-Titanband



Hammer und Kraftschneider



Umführungsinstrument mit Griff



Eigenschaften

LC-Titanband

Material: Rein-Titan

Die dem Knochen zugewandte Seite besitzt auf 70 mm Länge eine genoppte Struktur.

An einem Ende befindet sich eine Aussparung zum Einhängen des Bandes in das Umführungsinstrument.

Am gegenläufigen Ende befindet sich die Schnalle zum Fixieren des Bandes.


Länge: 260 mm

Dicke: 0.4 mm


Breite: 8.0 mm

Passendes Instrumentarium inklusive Lagerungssystem steht im Set LC-Titanband mit Schnalle (Set-Nr. 19.519.00) zur Verfügung.


Set LC-Titanband

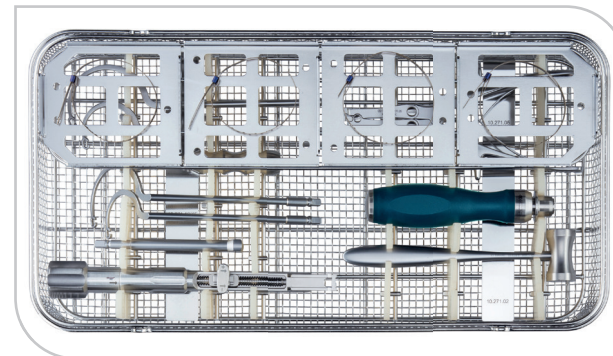

Set LC-Titanband komplett mit Bändern

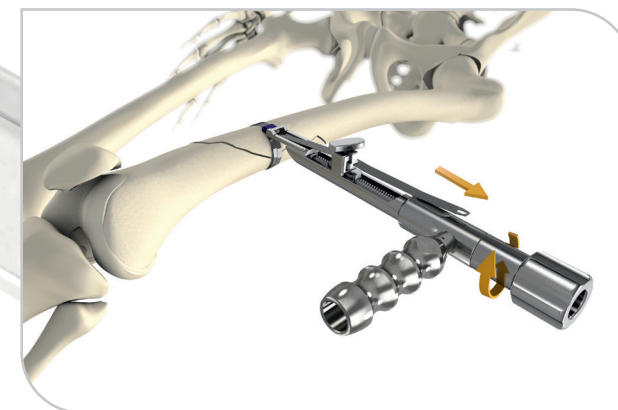

Stößel

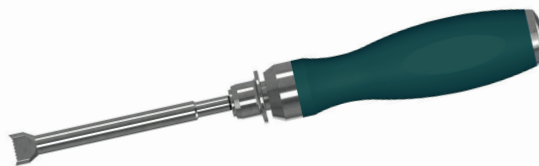

OPTIONAL: Aufsatz für Spindelgriff

