


LAPIDUS PLATTE 3.5

Königsee
Implantate

VaWiKo® Lapidus Platte 3.5
LochØ5 plantar Stufe 2

Lapidus Platte 3.5

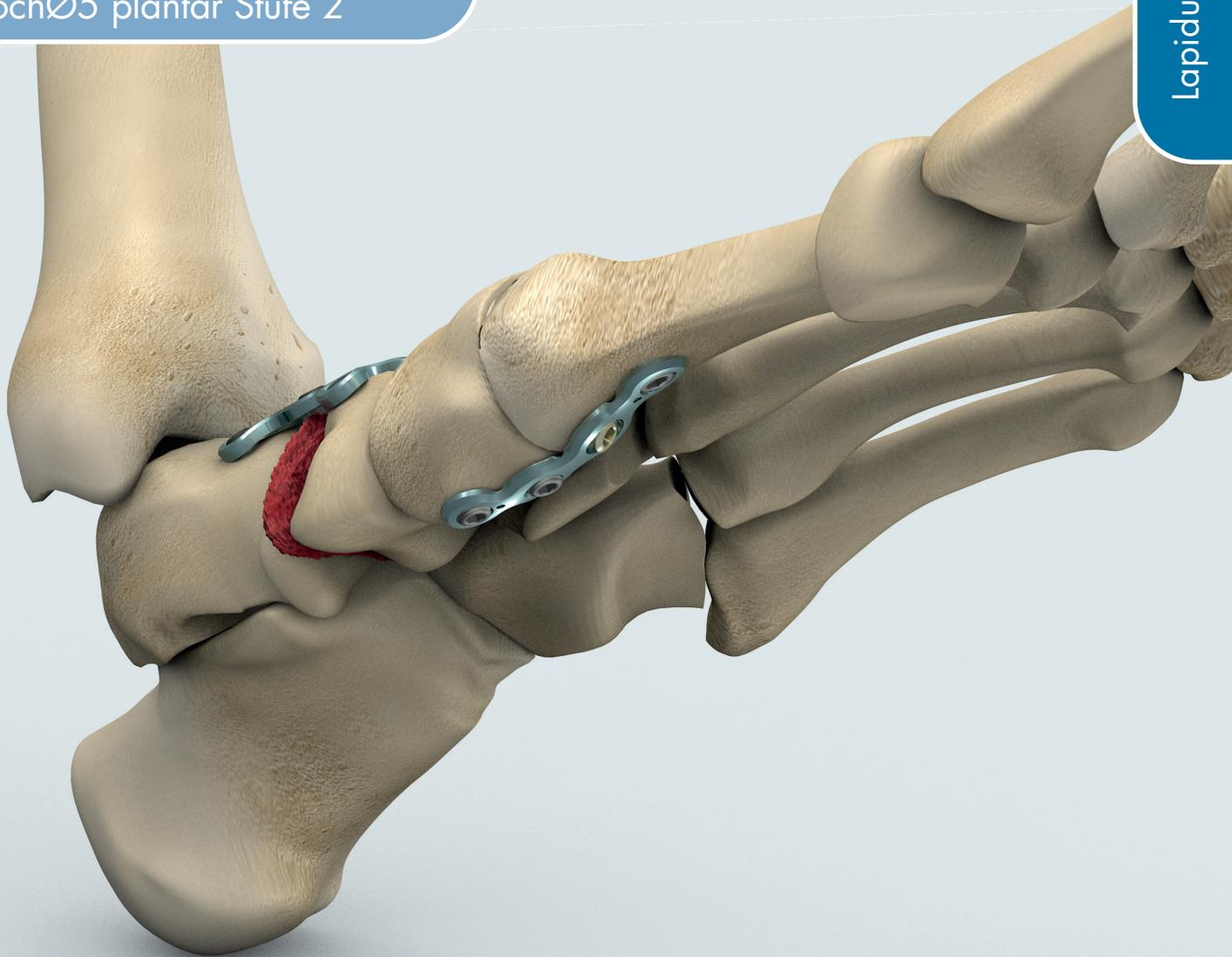

Art.-Nr. 5.2923.02



Art.-Nr. 5.2933.02



VaWiKo® Lapidus Platte 3.5 LochØ5 plantar Stufe 2 – Plattenstärke 2.0 mm

5.2923.02 VaWiKo® plantare Lapidus Platte 3.5; Stufe 2 mm; Kopf 5; Titan; rechts



4 047075 228607

5.2933.02 VaWiKo® plantare Lapidus Platte 3.5; Stufe 2 mm; Kopf 5; Titan; links



4 047075 228621

Alle Vorteile auf einen Blick

- **Höhere Primärstabilität und geringere Pseudarthrosenrate** im Vergleich zur dorsalen und medialen Platte bzw. Schraubenosteosynthese
- **Optimierte Biomechanik** durch plantare Plattenfixierung und Kompression der Arthrodeese bei Belastung
- Plattenlage **verhindert plantares Aufklappen** der Arthrodeese bei Belastung
- Geringeres Risiko einer iatrogenen Anhebung des Metatarsale 1
- Gute Abdeckung der Platte durch den *Musculus abductor hallucis*
- **Minimalinvasiv** durch kleine Plattengröße
- Dynamische Kompression möglich
- **OPTION5** – Variabel winkelstabiles Kombikompressionsloch für **5 Möglichkeiten der Verschraubung**
- **Frühzeitig belastungsstabile** Osteosynthese ohne Korrekturverlust

Zielgruppe

- Die Versorgung mit einer Rückfußplatte erfolgt bei adulten Patienten.
- Es liegt keine Einschränkung auf ausgewählte ethnische Gruppen vor. Die Patientenklientel wird lediglich durch anatomische Parameter begrenzt.

Eigenschaften

■ **NEU: OPTION5** – Variabel winkelstabiles Kombikompressionsloch für **5 Möglichkeiten der Verschraubung:** Standard; winkelstabil; variabel winkelstabil; Standard Kompression; winkelstabile Kompression)

- Zwei variabel winkelstabile Löcher für winkelstabile Kortikalisschrauben
- Ovales Loch für Standardverschraubung
- K-Draht Löcher zur temporären Fixation der Platte
- Anatomisch geformtes seitenspezifisches Plattendesign
- Plattenstärke 2.0 mm
- Reintitan; grün-blau anodisiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
Fuß-Platte AD 3.5 LochØ5 vws; Titan		
5.2813.23	4 Loch; 23 x 20 mm	1

Fuß-Platte AD-Interposition 3.5 LochØ5 vws; Titan		
5.2813.33	5 Loch; 33 x 20 mm	1

Multi-AD-Platte 3.5 LochØ5 vws; Titan		
5.2823.38	6 Loch; 38 x 20 mm	1
5.2823.53	8 Loch; 53 x 20 mm	1
5.2823.83	12 Loch; 83 x 20 mm	1

T-AD-Platte 3.5 LochØ5 vws; Titan		
5.2833.33	2/2 Loch; 33 x 8 mm	1

VaWiKo® Lapidus Platte 3.5 LochØ5 plantar Stufe 2; Titan		
*5.2923.02	Stufe 2; Kopf 5; rechts	1
*5.2933.02	Stufe 2; Kopf 5; links	1

Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube 3.5 Kopf 5; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; TiOB®		
		
Innensechskant		
3.138.10	Länge 10 mm	2
3.138.12	Länge 12 mm	2
3.138.14	Länge 14 mm	2
3.138.16	Länge 16 mm	2
3.138.18	Länge 18 mm	2
3.138.20	Länge 20 mm	2
3.138.22	Länge 22 mm	2
3.138.24	Länge 24 mm	2
3.138.26	Länge 26 mm	2
3.138.28	Länge 28 mm	2
3.138.30	Länge 30 mm	2
3.138.32	Länge 32 mm	2
3.138.36	Länge 36 mm	2
3.138.40	Länge 40 mm	2

Drähte		
6.031.10	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.0 x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.521.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Rückfußplatten 3.5	1

Set Rückfußplatten 3.5 vws




Set-Nr. 19.524.00  Innensechskant


Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube 3.5 Kopf 5; Vollgewinde; winkelstabil; selbstschneidend; Titan; TiOB®		
		
Innensechskant		
3.136.10	Länge 10 mm	5
3.136.12	Länge 12 mm	5
3.136.14	Länge 14 mm	5
3.136.16	Länge 16 mm	5
3.136.18	Länge 18 mm	5
3.136.20	Länge 20 mm	5
3.136.22	Länge 22 mm	5
3.136.24	Länge 24 mm	5
3.136.26	Länge 26 mm	5
3.136.28	Länge 28 mm	5
3.136.30	Länge 30 mm	5
3.136.32	Länge 32 mm	5
3.136.36	Länge 36 mm	5
3.136.40	Länge 40 mm	5

Instrumente		
2.904.06	Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 2.5 x 125 mm; Spl 60 mm; 2-lippig	1
2.9406.25	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2,7 mm - Ø 4,0 mm; SW 2,5; konisch	1
2.953.60	Messgerät mit Haken für Schrauben mit konischem Kopfgewinde Ø 3.5 – Ø 4.0 mm; Messbereich 60 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.977.12	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung 3.5 mit Kopf Ø 5.0 mm	1
2.977.13	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 3.5 mit Kopf Ø 5.0 mm	2


Implantation der Lapidus Platte

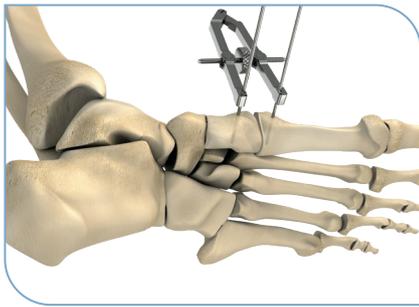


Aufweitung des Gelenkspaltes

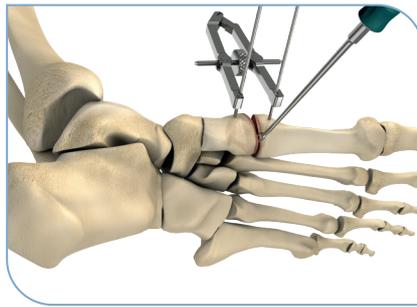


Entfernen von restlichem Knorpel

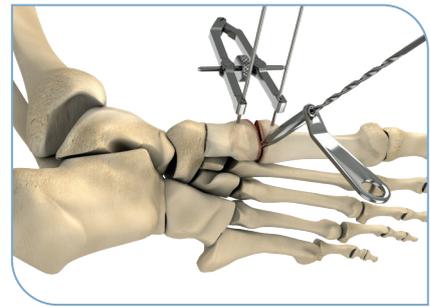


Anbohren der Arthrodesenflächen

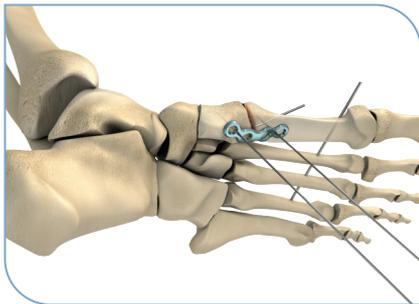


Temporäre Fixation

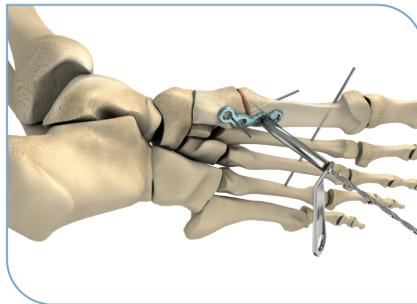


Bohren Standard

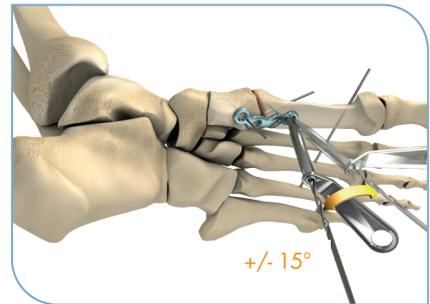

Bohren variabel winkelstabil

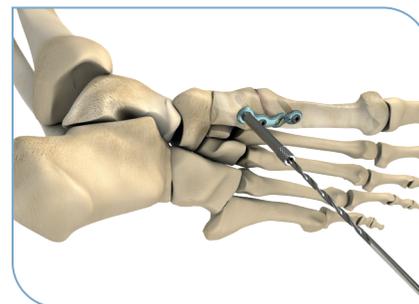

Bohren winkelstabil

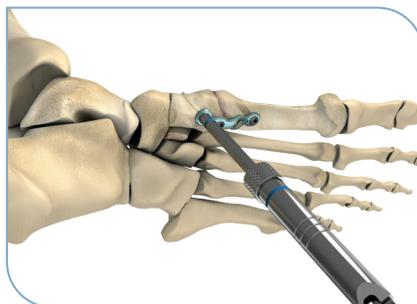

Längenmessung



Implantierte Platte

Ihr Kontakt zu uns



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf/Thüringen
Deutschland

Fon: + 49 36738 498 - 550

bestellung@koenigsee-implantate.de
www.koenigsee-implantate.de

Dieses Dokument ersetzt weder eine OP-Anleitung noch eine fachliche Einweisung zur Anwendung des Produktes. Ausführliche Informationen finden Sie unter <https://ksi.online-ifu.com>

CE 0197

Lapidus Platte 3.5

VaWiKo® Lapidus Platte 3.5 LochØ5 plantar Stufe 2

HeBo | Edition 04 | 2023-10

