


## Alle Vorteile auf einem Blick

- **Höhere Primärstabilität und geringere Pseudarthrosenrate** im Vergleich zur dorsalen und medialen Platte bzw. Schraubenosteosynthese
- **Optimierte Biomechanik** durch plantare Plattenfixierung und Kompression der Arthrose bei Belastung
- Plattenlage **verhindert plantares Aufklappen** der Arthrose bei Belastung
- Geringeres Risiko einer iatrogenen Anhebung des Metatarsale 1
- Gute Abdeckung der Platte durch den Musculus abductor hallucis
- **Minimalinvasiv** durch kleine Plattengröße
- Dynamische Kompression möglich
- **OPTION5** – Variabel winkelstabiles Kombi-kompressionsloch für **5 Möglichkeiten der Verschraubung**
- **Frühzeitig belastungsstabile** Osteosynthese ohne Korrekturverlust

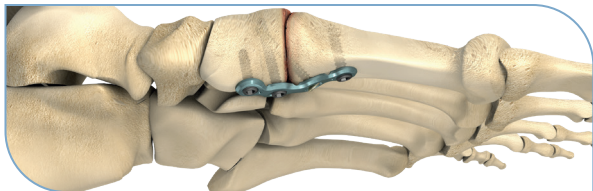

## Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für **LAPIDUS PLATTE 3.5** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-550

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

Copyright © Königsee Implantate GmbH/HeBo | Edition 04 | 2023-10

## LAPIDUS PLATTE 3.5

VaWiKo® Lapidus Platte 3.5  
LochØ5 plantar Stufe 2




## Zielgruppe


- Die Versorgung mit einer Rückfußplatte erfolgt bei adulten Patienten.
- Es liegt keine Einschränkung auf ausgewählte ethnische Gruppen vor. Die Patientenklientel wird lediglich durch anatomische Parameter begrenzt.

## Eigenschaften

- **NEU: OPTION5** – Variabel winkelstabiles Kombikompressionsloch für 5 Möglichkeiten der Verschraubung: Standard; winkelstabil; variabel winkelstabil; Standard Kompression; winkelstabile Kompression (2)
- Zwei variabel winkelstabile Löcher für winkelstabile Kortikalisschrauben (1 und 4)
- Ovale Loch für Standardverschraubung (3)
- K-Draht Löcher zur temporären Fixation der Platte
- Anatomisch geformtes seitenspezifisches Plattendesign
- Plattenstärke 2.0 mm
- Reintitan; grün-blau anodisiert

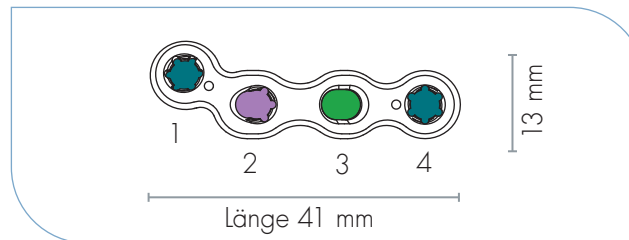

## Set Rückfußplatten 3.5 vws

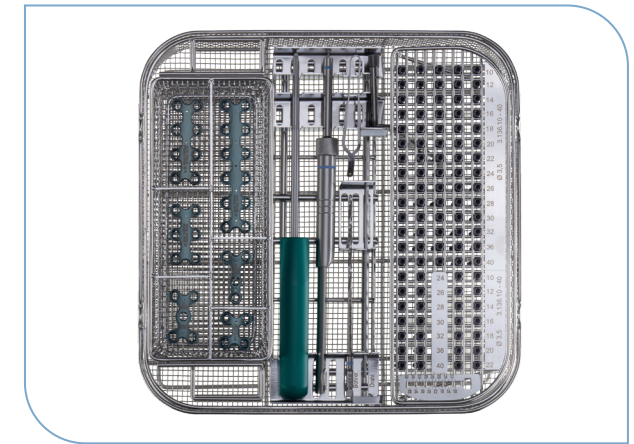

Set Rückfußplatten 3.5 vws



Kortikalisschraube 3.5  
Kopf 5; Vollgewinde;  
selbstschneidend; Titan;  
TiOB®



Kortikalisschraube 3.5  
Kopf 5; Vollgewinde;  
winkelstabil;  
selbstschneidend; Titan;  
TiOB®

### Information

Der Systemname VaWiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Variabel winkelstabile Kombination“ ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung in variablen Winkeln kombiniert. VaWiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

