

## Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für **GLEITNÄGEL** wecken konnten, melden Sie sich bei uns



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Deutschland

info@koenigsee-implantate.de

Fon: + 49 36738 498 - 550

Fax: + 49 36738 498 - 559

oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.


[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Die Gleitnägel ermöglichen eine rasche Heilung unter Erhaltung des vollen Bewegungs- und Funktionsumfanges.
- Besonders geeignet für Kinder, da bei der Anwendung Wachstumsstörungen vermieden werden.
- Optimale Stabilisierung der Fraktur durch Dreipunkt-Abstützung der Nägel im Knochen
- Frühfunktionelle Nachbehandlung möglich
- Einfache, minimal invasive Implantation
- Gutes kosmetisches Resultat
- Frakturferne Versorgung



Gleitnägel in Stahl und Titan

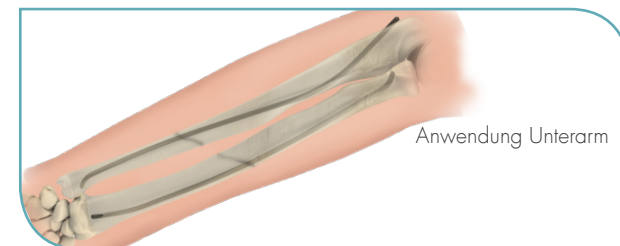

Anwendung Unterarm

## GLEITNAGEL

Stabilisierung/Fixierung von Röhrenknochen



## Indikationen

- Frakturen von Röhrenknochen, bei denen eine Dreipunkt-abstützung möglich ist.

### Bei Kindern:

- diaphysäre Frakturen langer Röhrenknochen
- ausgewählte metaphysäre und epimetaphysäre Frakturen von Röhrenknochen
- komplexe Frakturen der Clavicula

### Bei Erwachsenen:

- diaphysäre Frakturen von Röhrenknochen der oberen Extremitäten
- Claviculaschafffrakturen

## Zielgruppe

Die operative Behandlung mit den aufgeführten Implantaten erfolgt hauptsächlich bei Kindern und Jugendlichen.

In Körperregionen mit geringer mechanischer Belastung sind diese Implantate auch für Erwachsene geeignet.

### Vorgesehenes Körperteil:

Die operative Behandlung mit den aufgeführten Implantaten ist für lange Röhrenknochen bei Kindern und Jugendlichen bzw. für die obere Extremität und die Clavicula bei Erwachsenen vorgesehen.

## Eigenschaften

### Gleitnägel

Implantatstahl mit elektropoliertter Oberfläche

Titanlegierung mit anodisierter Oberfläche


Abgeflachtes Ende zur visuellen Bestimmung der Kufenrichtung

Die Kufe erleichtert das Einbringen des Gleitnagels und ermöglicht das Gleiten im Markraum


### Produktvarianten

Implantatstahl	Titanlegierung
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ø 1.5 - 5.0 mm</li> <li>· 450 mm lang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ø 1.2 - 5.0 mm</li> <li>· 450 mm lang</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ø 1.5 - 5.0 mm</li> <li>· 300 mm lang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ø 1.2 - 5.0 mm</li> <li>· 300 mm lang</li> </ul>

## Set Gleitnägel

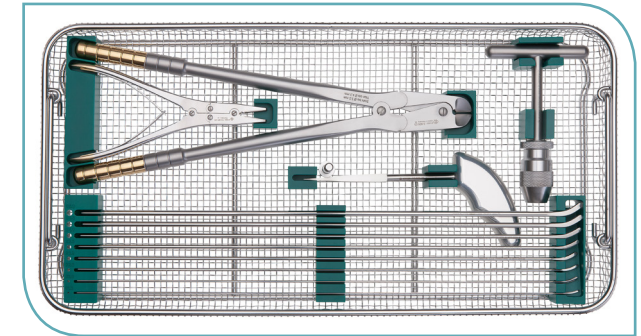


OP-Set Gleitnägel - Stahl - mit Instrumenten  
(verschiedene Durchmesser und Längen erhältlich)

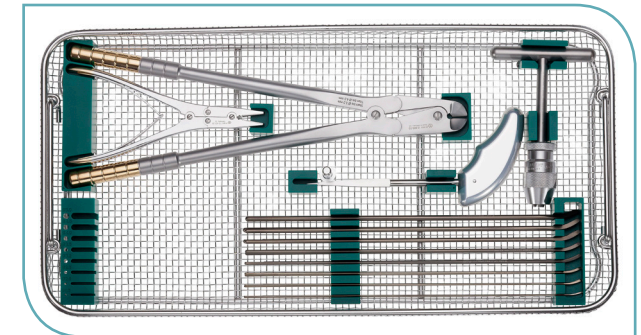


OP-Set Gleitnägel - Titan - mit Instrumenten  
(verschiedene Durchmesser und Längen erhältlich)

Anwendung Tibia

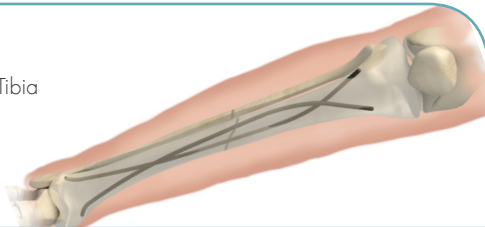

Anwendung distaler Humerus

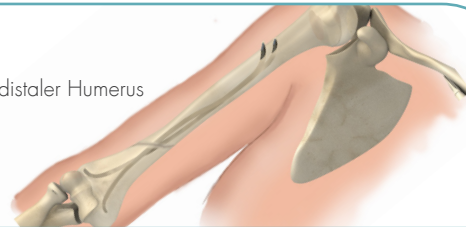

Anwendung Femur

