

## Alle Vorteile auf einen Blick

- **Anatomisch** geformtes, **variabel winkelstabil**es Implantat
- Einheitliche Plattenausführung für links und rechts
- Gute **Modellierbarkeit** des Implantats
- **Bilaterales Anliegen** führt zu **verringert**er Weichteilirritation
- Zwei kleine Ausleger zur erleichterten **Abstützung des distalen Patellapols**
- Die **winkelstabile bilaterale Plattenosteosynthese** bietet eine **höhere Stabilität und Rigidität** im Vergleich zur konventionellen Versorgung mit Zuggurtung oder kanülierten Schrauben.
- Senkung des Risikos der sekundären Dislokation
- Primäres Repositionsergebnis bleibt durch das **winkelstabile Prinzip des Fixateur Interne** erhalten

## Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für die **Variabel winkelstabile Patellaplatte 3.5** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.



### Königsee Implantate GmbH


OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-550

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

## PATELLAPLATTE

### Variabel winkelstabile Patellaplatte 3.5

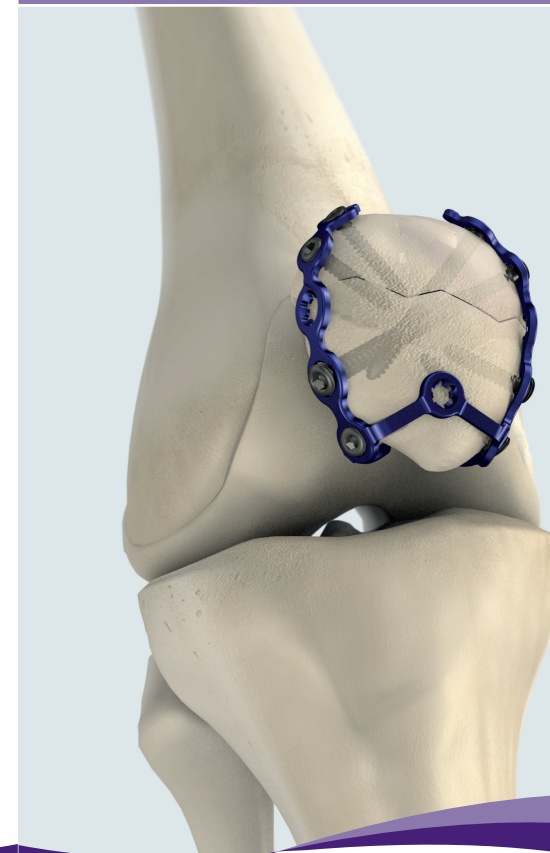

[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

## Zielgruppe

Die Versorgung mit einer variabel winkelstabilen Patellaplatte 3.5 erfolgt bei adoleszenten und adulten Patienten.



## Eigenschaften

### Variabel winkelstabile Patellaplatte 3.5

Reintitan

Blau anodisiert

11 Plattenlöcher


Anatomisch angepasste Plattenform

Einheitliche Plattenausführung  
für links und rechts

Variabel winkelstabile Löcher für  
winkelstabile Kortikalisschrauben  $\varnothing$  3.5 mm;  
Kopf  $\varnothing$  5.0 mm

Ösen zur temporären Fixation

## Set Patellaplatte

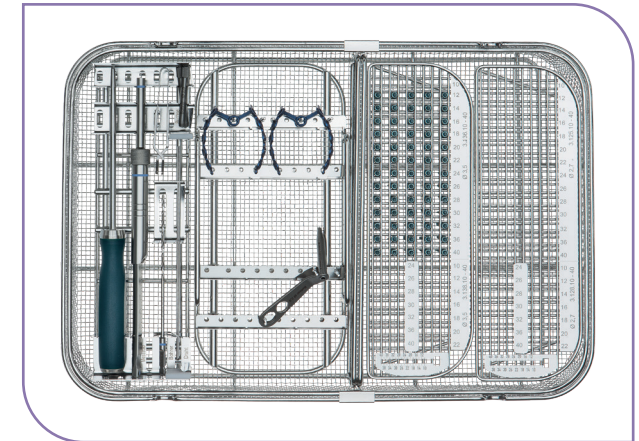

Set Patellaplatte 3.5 vws mit Instrumenten und Schrauben

 Innensechskant

