

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Zielblock für den Kopfbereich zur einfachen Montage
- Geeignet für den deltoideopectoralen Zugang und den Deltasplit
- Optimale Höhenausrichtung der Platte über den Ziel-block
- Temporäre Fixationsmöglichkeit der Platte und Ziel-block unabhängig von Schraubenapplikation
- Verbesserte Möglichkeit der Fixation der Tuberkel an der Platte durch optimales Durchstechen mit OP-Nadeln
- Operateur kann zum Besetzen der Kopflöcher im Plattenkopf zwischen drei winkelstabilen zweigängigen Schraubenarten wählen: Ø 3.5 mm Kortikalis/Ø 4.0 mm Kortikalis und Ø 4.0 mm Spongiosa
- Keine zusätzliche Gefährdung der wichtigen ventro-medialen Durchblutung
- Erreichbarkeit des nach dorso-cranial häufig dislozierten Tuberculum majus
- Durch cranio-caudale Röntgendarstellung sehr gute Überprüfbarkeit des Repositionsergebnisses möglich
- Gute Manipulierbarkeit der Fragmente durch vorgelegte Haltefäden
- Angeschrägte und unterschrittene Löcher erleichtern die Fixierung der Fäden durch die Platte
- Bestehende Rotatorenmanschetten(partial-)rupturen können mitversorgt werden

## Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für die **PROXIMALE HUMERUS PLATTE EIGHT<sup>2</sup> 4.0/3.5** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-550

ALLE PRODUKTE AUCH UNTER  
DER MDR IN NICHT STERIL UND  
STERIL ERHÄLTICH.



[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)


Copyright © Königsee Implantate GmbH  
SiZi | Edition 01 | 2024-07



**Königsee**  
Implantate

## HUMERUS PLATTE

Proximale Humerus Platte Eight<sup>2</sup> 4.0/3.5

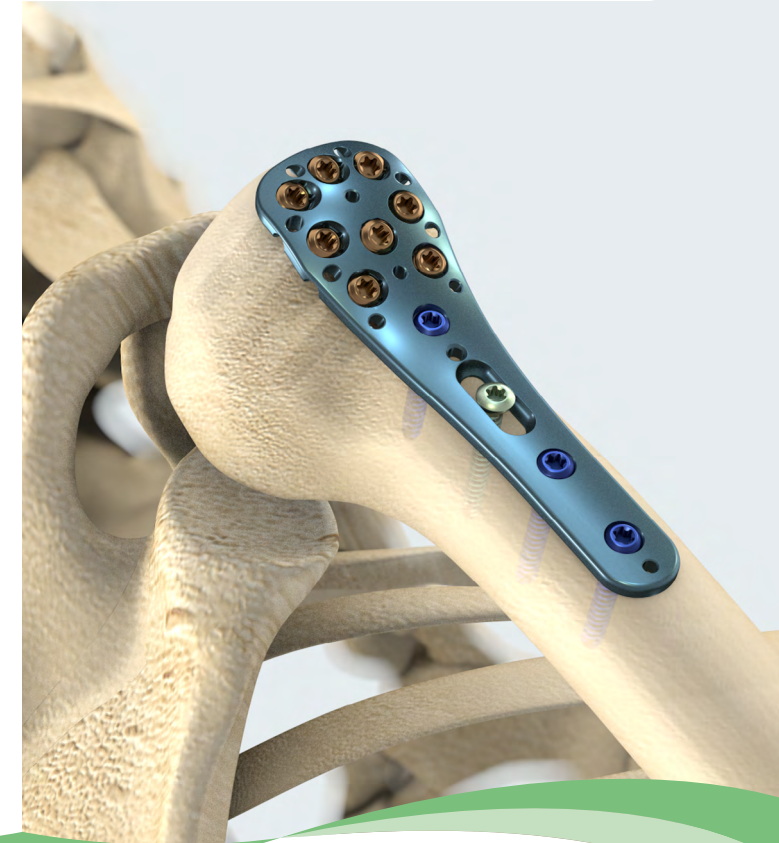

## Schrauben

### Kortikalisschraube<sup>2</sup> 4.0 ws ISR15 ss



- Ø 2.4 mm
- selbstschneidend
- Vollgewinde
- Verfügbare Längen:  
10 - 90 mm
- Anodisierte  
Oberfläche
- Titan

### Kortikalisschraube<sup>2</sup> 3.5 ws ISR15 ss



- Ø 3.5 mm
- selbstschneidend
- Vollgewinde
- Verfügbare Längen:  
10 - 70 mm
- Anodisierte  
Oberfläche
- Titan

ISR 15

### Kortikalisschraube 3.5 ISR15 ss



- Ø 3.5 mm
- selbstschneidend
- Vollgewinde
- Verfügbare Längen:  
8 - 140 mm
- Anodisierte  
Oberfläche
- Titan

### Spongiaschraube<sup>2</sup> 4.0 ws ISR15 ss



- Ø 4.0 mm
- selbstschneidend
- Vollgewinde
- Verfügbare Längen:  
10 - 80 mm
- Anodisierte  
Oberfläche
- Titan



Optional anwendbar  
Zielblock

## Erhältliche Plattenlängen

5.07933.8X  
Proximale Humerus Platte 4.0/3.5;  
vws; zweigängig; Titan

2 Loch; Länge 63 mm

3 Loch; Länge 77 mm

4 Loch; Länge 93 mm

5 Loch; Länge 109 mm

6 Loch; Länge 125 mm


8 Loch; Länge 157 mm

10 Loch; Länge 189 mm


12 Loch; Länge 221 mm

14 Loch; Länge 253 mm


## Sets Proximale Humerus Platte EIGHT<sup>2</sup>

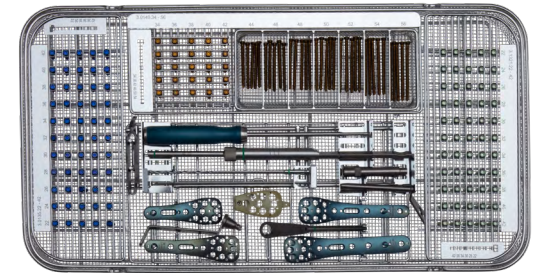

OP-Set Proximale Humerus Platte EIGHT<sup>2</sup> vws Korti

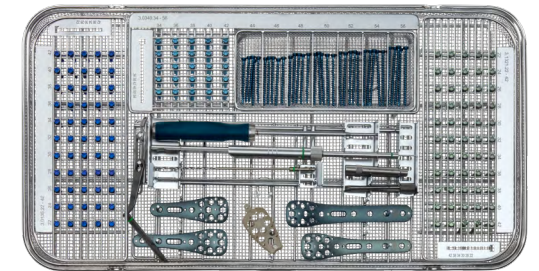

OP-Set Proximale Humerus Platte EIGHT<sup>2</sup> vws

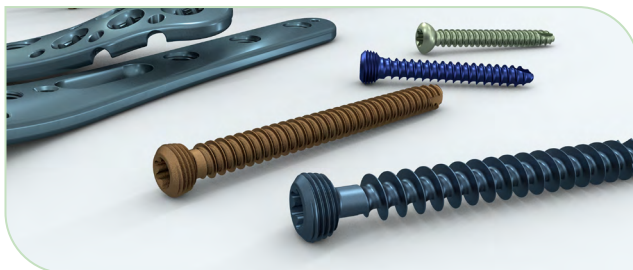

Art.-Nr. 5.07933.86

