

## Contacto

Si pudiéramos despertar su interés por  
**IMPLANTEX®** por favor,  
póngase en contacto con nosotros

## IMPLANTEX®

Instrumental para  
la retirada de implantes



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Alemania

export@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-560

o con su representante de ventas.

## Ventajas del tratamiento

- El set ImplantEx® de Königsee Implantate se utiliza para retirar implantes de titanio, aleación de titanio o acero inoxidable de diferentes tamaños entre Ø 1.5 – Ø 7.0 mm (minifragmentos, fragmentos pequeños y fragmentos grandes).
- Los destornilladores son de dimensiones estándar válidas y son compatibles con las cabezas de tornillo de uso habitual.
- Los mangos compactos permiten un manejo seguro y ergonómico durante la retirada de los tornillos, de modo que es posible aplicar al tornillo pares de giro elevados.
- El instrumental con acoplamiento rápido se utiliza de forma modular con un mango, por lo que puede cambiarse de forma rápida y segura.
- Todo el instrumental está claramente dispuesto en un contenedor perforado.
- El kit quirúrgico puede equiparse individualmente.


[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)



## Finalidad prevista

El instrumental se ha diseñado para ser utilizado en los campos de la Ortopedia y la Traumatología para la remoción de metales para los siguientes casos:

- Cabeza del tornillo intacta
  - Se necesita un destornillador adecuado
- Cabeza del tornillo defectuosa
  - Se necesita un instrumento de extracción
  - El instrumento de extracción no agarra
- Cabeza del tornillo rota
  - Se ve el eje
  - El eje NO se ve

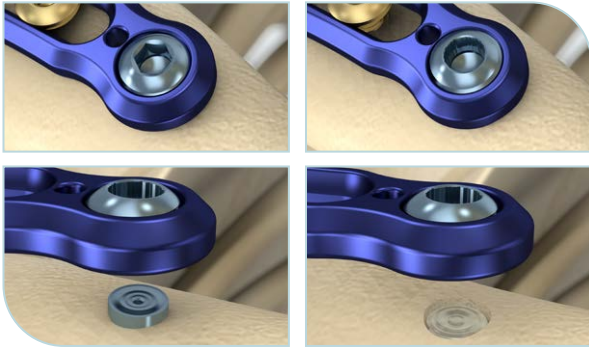



## Propiedades del producto

- Presentación en un contenedor perforado claramente ordenado
- Adecuado para el reacondicionamiento múltiple
- Los destornilladores corresponden a las dimensiones estándar válidas para tornillos con hexágono interior o en cruz y con entrada hexalobular
- Instrumental con acoplamiento rápido modular

### Para utilizar con

- Tornillos estándar
- Tornillos de estabilidad angular
- Tornillos con rosca parcial o completa
- Tornillos perforados
- Pernos de bloqueo

## ImplantEx® Instrumental

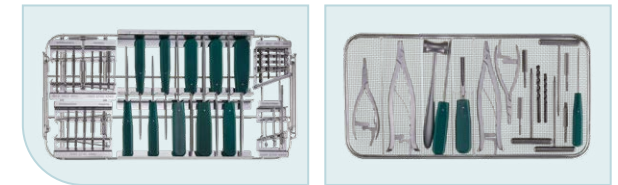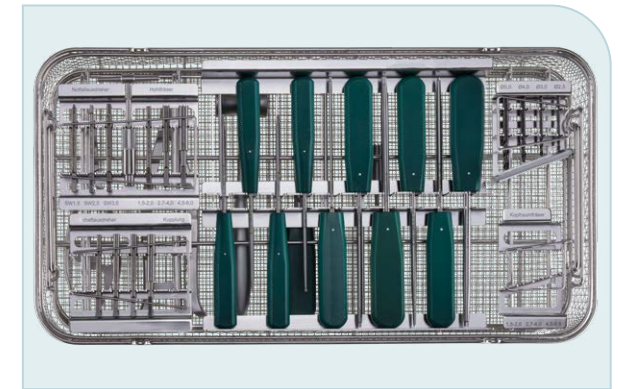

IMPLANTEX® INSTRUMENTAL

- Destornilladores
- Brocas helicoidal; DLC (Diamond Like Carbon)
- Instrumentos de extracción
- Fresas hueca
- Instrumentos de extracción para eje tornillo
- Otros instrumentos

