


Ventajas del tratamiento

- **Menor osteointegración** gracias a la uniforme distribución de las tensiones de compresión en el hueso (en comparación con los cerclajes de hilo o alambre)
- **La superficie rugosa** en el lado del hueso evita que el fleje se mueva y reduce aún más la osteointegración.
- **Gran resistencia a la rotura**
- **Retirada del metal mucho más sencilla** en comparación con los cerclajes de hilo o alambre
- El fleje **se puede reajustar**.
- **Aplicación universal** en fémur y húmero
- Como numerosos estudios han demostrado, no compromete el **riego sanguíneo en el periostio**.
- **Para mejorar el manejo** y facilitar la transmisión de la fuerza se puede utilizar **opcionalmente un inserto** para el mango del husillo del dispositivo tensor universal.

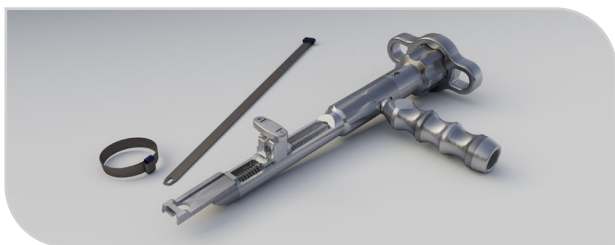

Contacto

Si hemos conseguido despertar su interés por el **FLEJE DE TITANIO LC** póngase en contacto con nosotros o con su representante de ventas.



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Alemania

export@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498 - 560

Incluso con la entrada en vigor del MDR nuestros productos siguen **SIN ESTÉRIL** o **ENVASADOS ESTÉRILES** disponibles.



www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH
Kr/Mo | Edición 05 | 2025-06



FLEJE DE TITANIO LC

Fleje de titanio LC con hebilla



 **Königsee**
Implantate

Grupo objetivo

El tratamiento con el fleje de titanio LC está reservado a pacientes adultos.

Tensor universal con fleje titanio LC



Martillo y cortador



Instrumento para la aplicación con empuñadura



Propiedades del producto

Fleje de titanio LC

Material: Titanio puro

La cara en el lado del hueso es rugosa en una extensión de 70 mm.

En un extremo presenta el orificio por el que el fleje se engancha al instrumento de derivación del fleche.

En el otro extremo se encuentra la hebilla para fijar el fleje


Longitud: 260 mm

Grosor: 0.4 mm


Anchura: 8.0 mm

Instrumental y un tabor adecuado esta previsto en el Set Fleje de Titanio LC (N.º set 19.519.00)

Set fleje de titanio

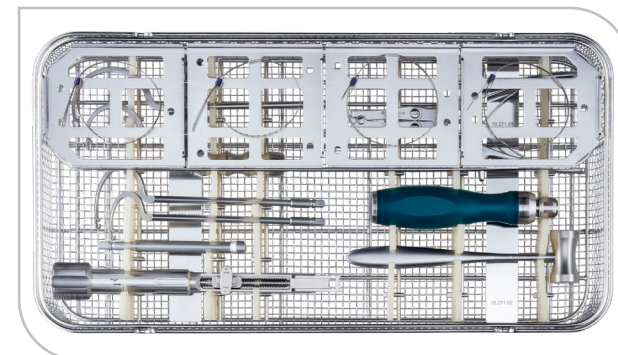

Set fleje de titanio

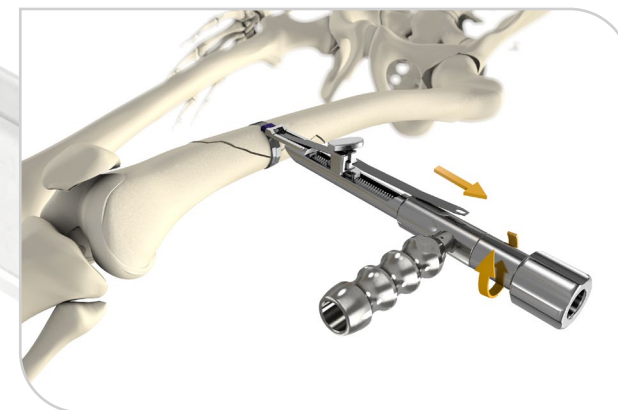

Portapunzón



OPCIONAL: Tapa para mango del husillo

