

## Las ventajas de un vistazo

- Cuidado **percutáneo**
- El diámetro de 7.5 mm permite al uso de un a guía metálica robusta de Ø 2.8 mm
- **Posicionamiento** del tornillo **antes** de la aplicación de **cemento**
- Sistema de la aplicación **especialmente sintonizado**
- **Riesgo reducido** de dislocación por cemento y complicaciones como compresión del nervio o embolia
- Rosca complete es **autorroscante** y autoperforante, rosca parcial es **cortando hacia atrás**, autorroscante y **autoperforante**
- implantable con y sin **arandela**

## Aplicaciones posibles

- **Fracturas y lesiones:**  
Fracturas osteoporóticas y no osteoporóticas de la pelvis
- **Enfermedades:**  
Artrosis en la articulación sacroilíaca



## Su contacto con nosotros

Si pudiéramos despertar su interés para los Tornillos **TIST™** contáctanos a o con su representante de ventas responsable.



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf/Thuringia  
Alemania

export@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-560

#### Información

**TIST™** = Tornillo iliosacro y pélvico. Los productos con la indicación "TM" son marcas registradas de Königsee Implantate.


A petición todos los implantes están disponibles embalado en estéril o no estéril.

[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

Copyright © Königsee Implantate GmbH/HeBo | Edición 04 | 2021-04

## TORNILLO TIST™

### Tornillo iliosacro y pélvico

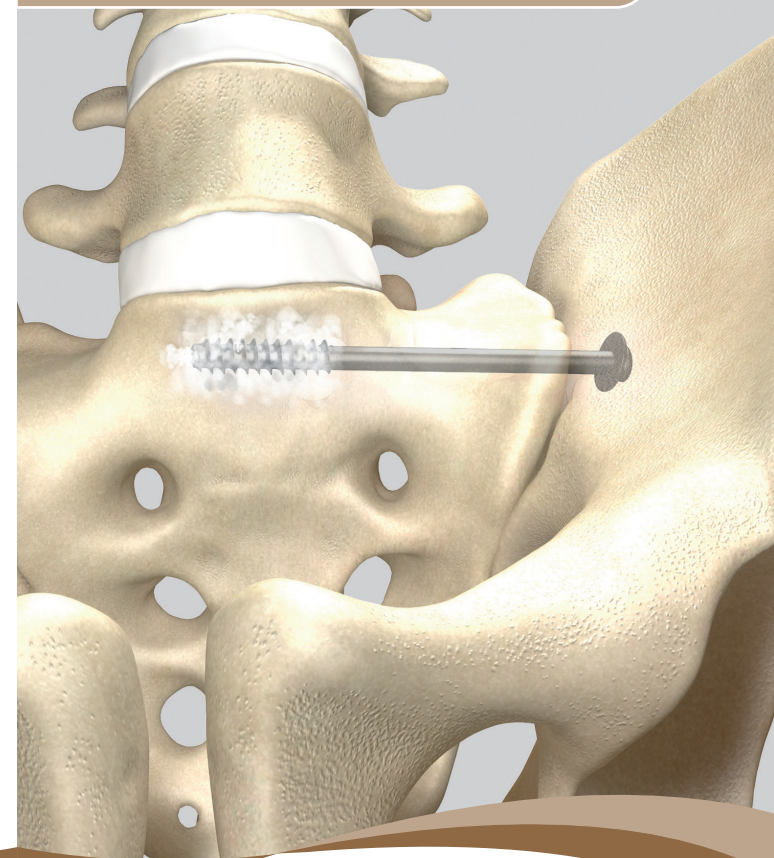


 **Königsee**  
Implantate


## Aplicación del cemento

Los Tornillos de TIS™ canulados y fenestrados permiten una cementación precisa y dosificada en huesos osteoporóticos, después del control de la posición de los tornillos.

Dependiendo de la compresión necesaria en el surco articular o en el punto de fractura se puede utilizar un tornillo de rosca parcial o completa.

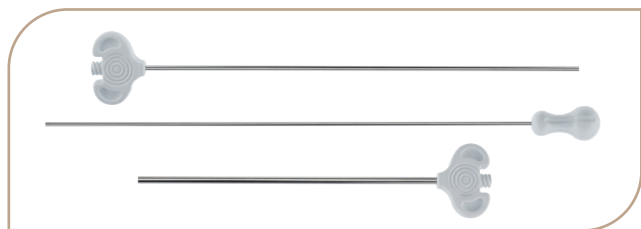

El sistema de SPASY™ para la aplicación de cemento permite un hallazgo rápido y seguro de los Tornillos de TIS™ por la cánula guía. Una aplicación segura y esmerada es posible.

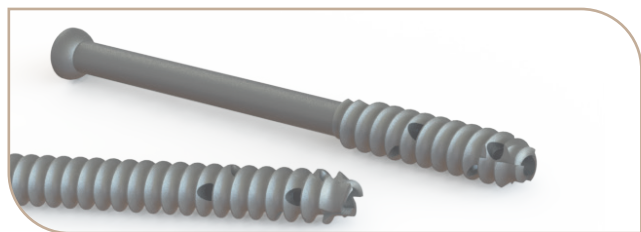

## Longitudes de tornillo disponibles


Superficie TiOB®	
rosca completa	rosca 32 mm
<b>Longitudes</b> 50 mm - 200 mm	<b>Longitudes</b> 50 mm - 200 mm
En pasos de 5 mm	
Todos tornillos también en envase estéril	

### Información


TiOB® es un recubrimiento superficial que tiene propiedades optimizadas.

## Set Instrumental 7.5

El Set Instrumental para todas longitudes (en envase estéril o en envase no estéril) del tornillo TIS™

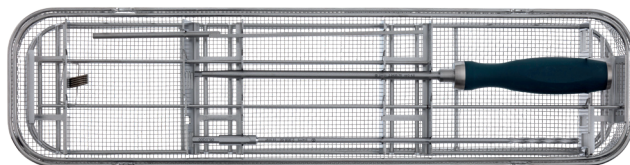

## Set de TIS™

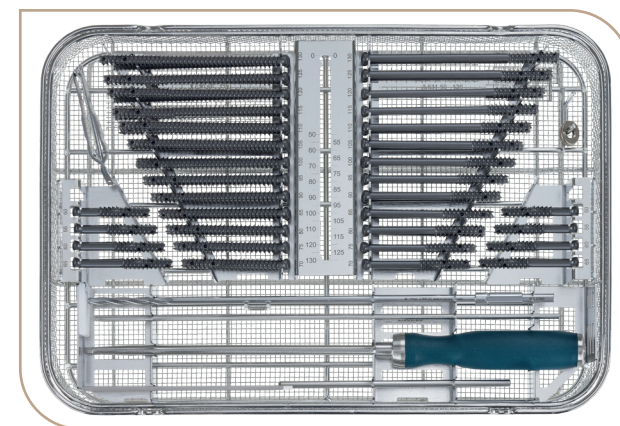

Set de Tornillos TIS™ Ø 7.5 mm con instrumental

SET TIS™	
rosca completa	rosca 32 mm
Longitud 50 - 130 mm	Longitud 50 - 130 mm

## Set adicional

SET ADICIONAL	
rosca completa	rosca 32 mm
Longitud 135 - 165 mm	Longitud 135 mm

Set adicional para tornillos TIS™ Ø 7.5 mm

