

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Zielblock für den Kopfbereich
- Geeignet für den deltoideopectoralen Zugang und den Deltaspalt
- Optimale Höhenausrichtung der Platte über den Zielblock
- Temporäre Fixationsmöglichkeit der Platte und Zielblock unabhängig von Schraubenapplikation
- Verbesserte Möglichkeit der Fixation der Tuberkel an der Platte durch optimales Durchstechen mit OP-Nadeln
- Operateur kann zum Besetzen der Kopflöcher im Plattenkopf zwischen drei winkelstabilen, zweigängigen Schraubenarten wählen: Ø 3.5 mm Kortikalis, Ø 4.0 mm Kortikalis und Ø 4.0 mm Spongiosa
- Keine zusätzliche Gefährdung der wichtigen ventromedialen Durchblutung
- Erreichbarkeit des nach dorso-cranial häufig dislozierten Tuberculum majus
- Durch cranio-caudale Röntgendarstellung sehr gute Überprüfbarkeit des Repositionsergebnisses möglich
- Gute Manipulierbarkeit der Fragmente durch vorgelegte Haltefäden
- Bestehende Rotatorenmanschetten(partial-)rupturen können mitversorgt werden.



Produkt online ansehen

## Ihr Kontakt zu uns


Wenn wir Ihr Interesse für die VaWiKo® proximale Humerusplatte<sup>2</sup> 4.0/3.5 wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-550

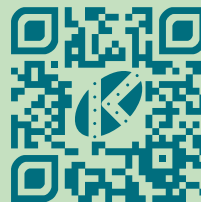

Unser Produktsortiment


ALLE PRODUKTE AUCH  
UNTER DER MDR  
IN NICHT STERIL UND STERIL  
ERHÄLTlich.

[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)



Copyright © Königsee Implantate GmbH | StZi | Edition 01 | 2026-04

## VaWiKo® proximale Humerusplatte<sup>2</sup> 4.0/3.5

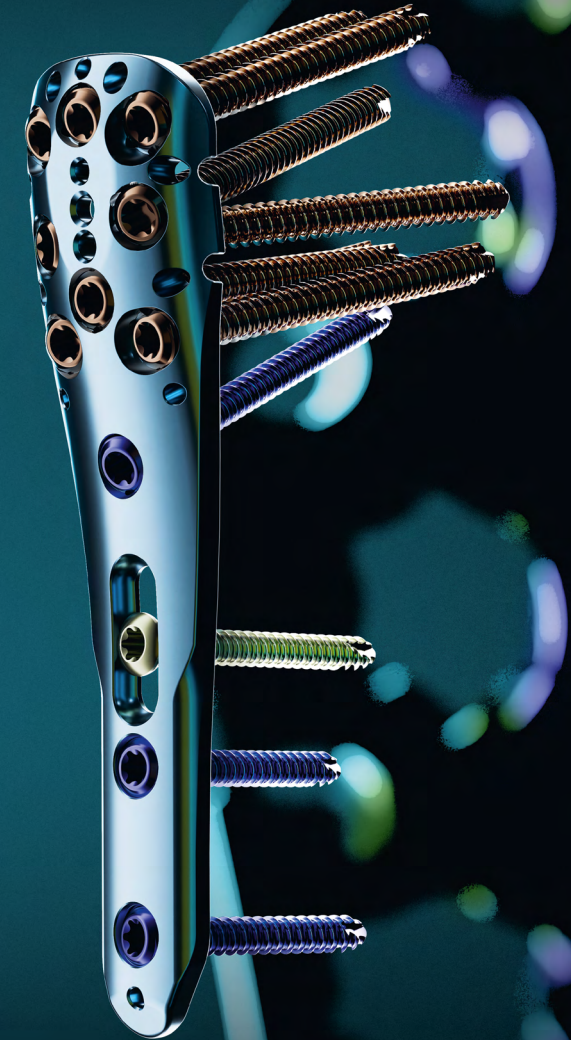

 **Königsee**  
Implantate

## Schrauben

### Kortikalisschraube<sup>2</sup> 4.0 ws ISR15 ss

- Ø 4.0 mm
- selbstschneidend
- Vollgewinde
- Verfügbare Längen:  
10 - 90 mm
- Anodisierte  
Oberfläche
- Titan



### Spongiaschraube<sup>2</sup> 4.0 ws ISR15 ss

- Ø 4.0 mm
- selbstschneidend
- Vollgewinde
- Verfügbare Längen:  
12 - 80 mm
- Anodisierte  
Oberfläche
- Titan



Innensechsrund 15

### Kortikalisschraube 3.5 ISR15 ss

- Ø 3.5 mm
- selbstschneidend
- Vollgewinde
- Verfügbare Längen:  
8 - 42 mm
- Anodisierte  
Oberfläche
- Titan



### Kortikalisschraube<sup>2</sup> 3.5 ws ISR15 ss

- Ø 3.5 mm
- selbstschneidend
- Vollgewinde
- Verfügbare Längen:  
10 - 70 mm
- Anodisierte  
Oberfläche
- Titan



Optional anwendbar  
Zielblock

## Erhältliche Plattenlängen

5.07953.8X

Proximale Humerusplatte 4.0/3.5;  
variabel winkelstabil; zweigängig; Titan

3 Loch; Länge 77 mm

4 Loch; Länge 93 mm

5 Loch; Länge 109 mm

6 Loch; Länge 125 mm

7 Loch; Länge 141 mm

8 Loch; Länge 157 mm



## 1 Winkelstabile Verschraubung

- Reproduzierbare, standardisierte Schraubenverteilung
- Kontrollierte Schraubenplatzierung ohne Winkelabweichung
- Präzise Führung beim Setzen und Verriegeln der Schrauben

## 2 Variabel winkelstabile Verschraubung ±15°

- Anpassung an Frakturmorphologie und Fragmentlage
- Gezielte subchondrale Schraubenplatzierung
- Berücksichtigung individueller Anatomie
- Kontrollierte Winkelvariation im System


## 3 Kalkarnahe Schraubenposition

- Abstützung der medialen Säule


## 4 Fadenfixationslöcher

- Direkte Refixation der Rotatorenmanschette
- Sichere Tuberkula-Anbindung
- Integration der Weichteilrekonstruktion in das Osteosynthesekonstrukt


## Sets VaWiKo® proximale Humerusplatte<sup>2</sup> 4.0/3.5

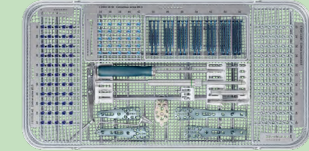

Set VaWiKo® Humerus zweigängig 4.0/3.5 Spongiosa für winkelstabile Ø 4.0 mm Spongiaschrauben und winkelstabile Ø 3.5 mm Kortikalisschrauben nicht steril verpackt Set-Nr. 19.3753.10 / steril verpackt Set-Nr. 19.3753.10PS+

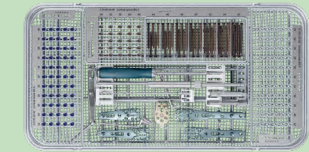

Set VaWiKo® Humerus zweigängig 4.0/3.5 Kortikalis für winkelstabile Ø 4.0 mm Kortikalisschrauben und winkelstabile Ø 3.5 mm Kortikalisschrauben nicht steril verpackt Set-Nr. 19.3752.10 / steril verpackt Set-Nr. 19.3752.10PS+

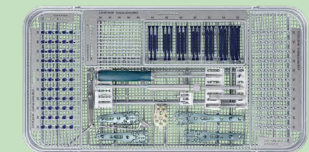

Set VaWiKo® Humerus zweigängig 3.5/3.5 Kortikalis für winkelstabile Ø 3.5 mm Kortikalisschrauben nicht steril verpackt Set-Nr. 19.3751.10 / steril verpackt Set-Nr. 19.3751.10PS+

Alle drei Sets sind mit Ø 3.5 mm Standard Kortikalisschrauben bestückt.

Zweigängige Produkte sind mit "2" gekennzeichnet (z.B. Humerusplatte<sup>2</sup>).